

M371-Test

Producto para diagnóstico in vitro: uso
solo por usuarios profesionales

REF MCS0105

REF MCS0115HT

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el test y sígala
cuidadosamente para garantizar la fiabilidad de los resultados del test.



Versión 16, © mir|detect GmbH, a fecha de 1 de septiembre de 2026.



mir|detect GmbH, Fischkai 1,
27572 Bremerhaven, Alemania
www.mirdetect.de

Índice

1. Denominación y uso previsto del producto	4
2. Fundamentos tecnológicos del procedimiento de prueba	4
3. Reactivos incluidos en el kit	6
3.1. Componentes	6
3.2. Componentes reactivos del M371-Test	7
3.3. Información y documentos sobre el M371-Test	7
3.4. Accesorios opcionales para el M371-Test	7
3.5. Sustancias peligrosas y componentes de origen animal en el kit del M371-Test	7
4. Transporte, almacenamiento y estabilidad	8
5. Equipo adicional necesario	9
5.1. Material general de laboratorio	9
5.2. Fungibles y reactivos generales	9
5.3. Requisitos del instrumento	10
6. Precauciones	10
6.1. Precauciones en el laboratorio	10
6.2. Precauciones de protección frente a infecciones	10
6.3. Notificación de incidencias relacionadas con el producto	11
6.4. Eliminación del material y los reactivos de trabajo	11
7. Control de calidad	11
8. Obtención y procesamiento de las muestras	12
8.1. Extracción de sangre y conservación de muestras	12
8.2. Precauciones para la obtención de suero y plasma	13
8.3. Extracción de miRNA	13
9. Realización del M371-Test	14
9.1. Realización general de la prueba	14
9.2. Realización de la síntesis del cDNA	15
9.3. Realización de la preamplificación	17
9.4. Preparación de las muestras preamplificadas	18
9.5. Asignación de la placa qPCR	18
9.6. Cargar la placa qPCR	19
10. Análisis de resultados	20
10.1. Archivo de evaluación del M371-Test e importación de los datos	20
10.2. Análisis de resultados	21
10.2.1. Control negativo	22

10.2.2. miR de referencia	22
10.2.3. Evaluación de las pruebas	22
11. Guía de resolución de problemas (Troubleshooting Guide)	23
12. Limitaciones del procedimiento	24
13. Datos de rendimiento específicos	25
13.1. Rendimiento analítico	25
13.1.1. Sensibilidad analítica	25
13.1.2. Especificidad analítica	25
13.1.3. Límite de detección y cuantificación (LoD, LoQ)	25
13.1.4. Linealidad	26
13.2. Precisión	26
13.2.1. Precisión de repetición	26
13.2.2. Precisión comparativa	26
13.3. Eficacia clínica	26
13.4. Interferencia	29
13.4.1. Hémolisis	29
13.4.2. Otros estados médicos	29
13.4.3. Reactividad cruzada	29
13.5. Summary of Safety and Performance (Resumen de seguridad y eficacia)	30
14. Explicación de los símbolos	30
15. Cambios en las instrucciones de uso anteriores	31
15.1. Cambios con respecto a la versión 15	31
16. Referencias	31
17. Información para el comprador	33
17.1. Fabricante	33
17.2. Marcas	33
17.3. Distribuidores	33
18. Anexo	34
18.1. Plantillas para calcular los volúmenes de la Mastermix (MM) de síntesis del cDNA	34

1. Denominación y uso previsto del producto

El M371-Test es un diagnóstico in vitro (DIV) certificado según el Reglamento (UE) 2017/746 DIVR basado en la medición de la abundancia relativa (RQ) del marcador tumoral miR-371a-3p. Para ello, se cuantifican el miR-371a-3p y un control endógeno en 200 µl de suero o plasma sanguíneo mediante qPCR.

M371-Test es una prueba no automatizada con una interpretación cualitativa de los resultados que detecta la presencia de tumores testiculares de células germinales (tipo 2, Germ Cell Neoplasia in situ derived (TGCT derivado de GCNis) y puede ser utilizada para el diagnóstico y el seguimiento de este tumor por parte de usuarios profesionales. La población de la prueba incluye pacientes adultos varones con sospecha o detección de tumor testicular de células germinales (tipo II, TGCT derivado de GCNis). El resultado de la prueba no puede utilizarse como único diagnóstico primario de un tumor testicular de células germinales ni para detectar recidivas. Todo M371-Test positivo debe confirmarse mediante un procedimiento de diagnóstico clínico adecuado.

2. Fundamentos tecnológicos del procedimiento de prueba

El kit del M371-Test contiene todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de sangre para la detección de tumores de células germinales del testículo a partir de miRNA ya extraído. Se incluye el archivo de evaluación del M371-Test opcional para la evaluación de las muestras.

El procedimiento de detección se basa en la detección por fluorescencia del microRNA (miRNA) miR-371a-3p mediante PCR cuantitativa en tiempo real. Para medir este marcador tumoral, es necesario aislar el RNA, incluidos los miRNA, de la muestra del paciente (suero o plasma). Los reactivos para este primer paso de aislamiento **no** se incluyen en el kit.

En el siguiente paso, el marcador tumoral miR-371a-3p, así como un miRNA adicional que sirve de control endógeno (en lo sucesivo, denominado miR de referencia), se transcriben en cDNA con cebadores específicos. En el siguiente paso de preamplificación, el cDNA se amplifica en una PCR (preamplificación). A continuación, se determina la abundancia relativa del marcador tumoral miR-371a-3p mediante PCR cuantitativa y se normaliza mediante el miR de referencia. Cuanto antes pueda detectarse una señal de fluorescencia durante la qPCR, mayor será el número de moléculas del marcador tumoral o del miR de referencia presentes en la muestra. Estos valores se expresan como valores «Ct». La abundancia relativa (RQ) de miR-371a-3p se calcula según el método $\Delta\Delta Ct$ (Livak y Schmittgen, 2001) mediante el miR de referencia y un valor fijo (calibrador). Primero se calcula el valor ΔCt para cada muestra: $\Delta Ct = Ct(\text{miR-371a-3p}) - Ct(\text{miR de referencia})$. A continuación se calcula la diferencia entre el valor ΔCt de la muestra y el valor ΔCt del calibrador, cuya expresión relativa de miR-371a-3p se establece en 1: $\Delta\Delta Ct = \Delta Ct(\text{muestra}) - \Delta Ct(\text{calibrador})$. La expresión relativa se calcula mediante la siguiente fórmula: $RQ = 2^{-\Delta\Delta Ct}$. El valor RQ es un múltiplo de la expresión del calibrador. El archivo de evaluación opcional («Archivo de evaluación del M371-Test», consulte el capítulo 3.4.

Accesorios opcionales para el M371-Test) puede realizar estos cálculos después de haber transferido correctamente los valores Ct medidos.

Los resultados del M371-Test deben evaluarse teniendo en cuenta el escenario clínico, dependiendo de si la prueba se utiliza para realizar un diagnóstico primario o para detectar recidivas en el seguimiento de pacientes con tumores testiculares (tabla 1). En el contexto de un diagnóstico primario, no puede establecerse un resultado claro (INDETERMINATE) (no confirmado) para muestras con una

abundancia relativa de entre 5 y 10, ya que este es el límite de cuantificación de la prueba. En tal caso, el M371-Test debe repetirse con otra muestra al cabo de unas semanas.

Tabla 1: interpretación de los resultados de M371-Test en función del escenario clínico.

Diagnóstico primario (detección de tumores primarios)	
RQ < 5	Negativo, baja probabilidad tumoral
$5 \leq \text{RQ} < 10$	Indeterminado (INDETERMINATE), repetir la prueba después de unas semanas
$\text{RQ} \geq 10$	Positivo, alta probabilidad tumoral
Seguimiento (detección de recidivas)	
RQ < 15	Negativo, baja probabilidad de recidiva
$\text{RQ} \geq 15$	Positivo, alta probabilidad de recidiva

Para una explicación más detallada de la evidencia científica, consulte el capítulo «13. Datos de rendimiento específicos» de las presentes instrucciones.

Toda prueba se realiza con un control negativo (NC). Para evaluar y validar los controles, consulte el capítulo «10. Análisis de resultados» de las presentes instrucciones.

3. Reactivos incluidos en el kit

3.1. Componentes

El M371-Test está disponible en dos versiones (número de artículo MCS0105 y número de artículo MCS0115HT).

Número de artículo MCS0105: contiene reactivos para cinco muestras de pacientes y cinco controles negativos. El usuario puede medir cada muestra de forma separada con un control negativo (consulte la tabla 2).

ATENCIÓN: ¡en este caso, el control negativo solo se mide **una vez** en la preamplificación y en la qPCR!

Tabla 2: contenido del kit del M371-Test MCS0105.

Reactivo	Recipiente	Volumen [μl]
cDNA Solution (negro)	1 tubo	90
Reverse Transcriptase (amarillo)	1 tubo	13,12
RNase Inhibitor (transparente)	1 tubo	2,49
PreAmp Solution (verde)	1 tubo	350
Target Solution (azul)	1 tubo	328
Control Solution (violeta)	1 tubo	328
PCR-grade water (blanca)	1 tubo	1000

Número de artículo MCS0115HT: contiene reactivos para cinco muestras de pacientes y un control negativo. El usuario debe medir todas las muestras en un **único** proceso (consulte la tabla 3).

Tabla 3: contenido del kit del M371-Test MCS0115HT.

Reactivo	Recipiente	Volumen [μl]
cDNA Solution (negro)	1 tubo	153
Reverse Transcriptase (amarillo)	1 tubo	22,30
RNase Inhibitor (transparente)	1 tubo	4,24
PreAmp Solution (verde)	1 tubo	786
Target Solution (azul)	1 tubo	770
Control Solution (violeta)	1 tubo	770
PCR-grade water (blanca)	1 tubo	1000

3.2. Componentes reactivos del M371-Test

cDNA Solution (negro)

- cebadores en forma de horquilla (stem-loop) específicos de miRNA para el miRNA diana y de referencia

Reverse Transcriptase (amarillo)

- Reverse Transcriptase

PreAmp Solution (verde)

- cebadores específicos de miRNA para el miRNA diana y de referencia
- DNA polimerasa

Target Solution (azul)

- cebadores específicos de miRNA y sonda para el miRNA diana
- DNA polimerasa

Control Solution (violeta)

- cebadores específicos de miRNA y sonda para el miRNA de referencia
- DNA polimerasa

3.3. Información y documentos sobre el M371-Test

Las instrucciones de uso y los tutoriales en vídeo para realizar el test están disponibles en el sitio web de mir|detect en <https://www.mirdetect.de/download>. Cuando se publiquen las instrucciones de uso revisadas, se notificará a los clientes la nueva versión por correo electrónico. Puede solicitar una versión en papel de las instrucciones de uso a través del formulario de contacto de nuestro sitio web (<https://www.mirdetect.de/Service/>) o por correo electrónico.

3.4. Accesorios opcionales para el M371-Test

El archivo de evaluación del M371-Test («M371-Test Evaluation File»; solo disponible en inglés) es una aplicación informática de hoja de cálculo opcional con fórmulas para la evaluación de muestras y se transmiten en formato electrónico (por correo electrónico). Las versiones actualizadas también se envían por correo electrónico.

3.5. Sustancias peligrosas y componentes de origen animal en el kit del M371-Test

Los componentes PreAmp Solution, Target Solution y Control Solution contienen formamida en concentraciones muy bajas. Ninguno de los componentes del M371-Test es perjudicial para la salud. De conformidad con la Directiva 1999/45/CE y los Reglamentos (CE) 1907/2006 y 1272/2008, no se precisa una ficha de datos de seguridad para el M371-Test, ya que contiene menos de un 1 % de componentes clasificados como peligrosos y no más de un 0,1 % de componentes clasificados como cancerígenos. Por este motivo, mir|detect GmbH no proporciona una ficha de datos de seguridad para este producto.


Si bien siempre se deben usar guantes protectores, ropa adecuada y gafas de seguridad al trabajar con estas u otras sustancias químicas, mir|detect GmbH no asume ninguna responsabilidad por daños materiales y/o lesiones derivados del uso o contacto con este producto.

Una materia prima utilizada para la producción de la Target Solution y la Control Solution contiene gelatina animal. El fabricante de la materia prima asegura que el riesgo de contaminación por EEB/EET es insignificante.

Además, el riesgo se minimiza mediante el uso de ropa protectora (guantes, bata de laboratorio y gafas de seguridad, consulte el capítulo «6. Precauciones») y el trabajo bajo una mesa de laboratorio para preparar PCR mientras se realiza el M371-Test. El M371-Test solo puede ser realizado por usuarios especializados.

4. Transporte, almacenamiento y estabilidad

El M371-Test se envía a una temperatura $< 0^{\circ}\text{C}$ por correo urgente. **En caso de daños durante el transporte, póngase en contacto inmediatamente con la empresa de transporte así como con mir|detect GmbH o con nuestro socio de distribución a través del cual adquirió el M371-Test.** Los datos de contacto figuran en el capítulo «17. Información para el comprador». Los tubos de reactivos dañados no deben utilizarse, sino eliminarse inmediatamente. Lo mismo se aplica a los kits que no se han refrigerado lo suficiente durante el transporte. No deben mezclarse componentes de diferentes lotes del kit.

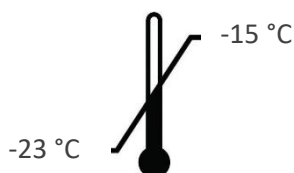

Guarde todos los reactivos del kit entre -23°C y -15°C antes y después de abrirlo por primera vez. Proteja de la luz la Target Solution (azul) y la Control Solution (violeta). Todos los componentes pueden descongelarse y volver a congelarse hasta ocho veces.



Si se cumplen las condiciones de almacenamiento, pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad indicada en el exterior del kit (periodo de validez máximo: diez meses). No utilice ningún material después de la fecha de caducidad.

5. Equipo adicional necesario

5.1. Material general de laboratorio

Para utilizar el M371-Test se necesita el siguiente material de laboratorio.

- Accesorios opcionales: archivo de evaluación del M371-Test («M371-Test Evaluation file»)*
- Mesa de laboratorio para preparar PCR
- Instrumento de PCR convencional
- Bloques de refrigeración para los reactivos en uso
- Agitador Vortex
- Pipetas con volumen ajustable en los tamaños adecuados
- Opcional: dispensador electrónico
- Centrífuga de sobremesa con un rotor para tubos de reacción de 0,2/1,5 ml
- Centrífuga de placas para placas PCR
- Instrumento de PCR en tiempo real**

* El archivo de evaluación del M371-Test se validó con Microsoft Excel para Microsoft 365 MSO.

** El M371-Test se validó con los siguientes termocicladores de PCR en tiempo real:

- LightCycler® 480 II qPCR Instrument (Roche Diagnostics) con bloque calefactor de 96 pocillos
- cobas® z 480 qPCR Instrument (Roche Diagnostics) con bloque calefactor de 96 pocillos
- LightCycler® PRO qPCR Instrument (Roche Diagnostics) con bloque calefactor de 96 pocillos
- QuantStudio™ 5 (Thermo Fisher Scientific) con bloque calefactor de 96 pocillos
- QuantStudio™ 5 Dx (Thermo Fisher Scientific) con bloque calefactor de 96 pocillos
- AriaDx (Agilent) con bloque calefactor de 96 pocillos
- CFX96™ qPCR Instrument (BioRad) con bloque calefactor de 96 pocillos

5.2. Fungibles y reactivos generales

Todos los fungibles deben ser de polipropileno y no contener RNasas, DNasas, DNA ni inhibidores de la PCR.

- Tubo de recogida de sangre*
- Criotubos autoportantes
- Kit de extracción de miRNA**
- Tubos de reacción de 1,5 ml con fondo cónico y tapa de seguridad (polipropileno)
- Tubos de reacción para PCR de 0,2 ml (p. ej., tiras de 8 tubos)
- Puntas de pipeta con filtro
- Opcional: accesorio para dispensador electrónico
- Placas de PCR con láminas de aluminio adhesivas
- Aplicador para las láminas de aluminio adhesivas

* Necesarios para la obtención de suero o plasma. Para suero, se recomienda utilizar S-Monovette® Serum-Gel (7,5 ml o 9 ml) Para el plasma, utilice **exclusivamente** S-Monovette® cfDNA Exact (9,2 ml); encontrará información más detallada sobre la obtención de suero o plasma en el capítulo «8. Obtención y procesamiento de las muestras».

** Necesarios para la extracción del miRNA. Se recomienda la extracción de RNA mediante los siguientes métodos:

- Para suero y plasma: kit de suero/plasma miRNeasy Serum de QIAGEN GmbH.

- Para suero y plasma: kit de plasma y suero Maxwell® RSC miRNA de Promega
- Solo para plasma: kit de aislamiento de RNA total MagMAX™ mirVana™ con el KingFisher® Apex Dx de Thermo Fisher Scientific

5.3. Requisitos del instrumento

La instalación, calibración, calificación funcional y mantenimiento de todos los instrumentos utilizados debe realizarse de conformidad con las instrucciones del fabricante y es responsabilidad del usuario de la prueba. El usuario también es responsable de implementar procedimientos de control de calidad adecuados.

6. Precauciones

El usuario técnico es responsable de cumplir con las normas de laboratorio pertinentes. Llevar siempre bata de laboratorio, guantes desechables y gafas protectoras adecuados al trabajar con productos químicos.

6.1. Precauciones en el laboratorio

Deben respetarse normas como DIN EN ISO 17025 o DIN EN ISO 15189 para evitar el riesgo de contaminación cruzada de las muestras de los pacientes antes, durante y después de la extracción de RNA. Evite introducir nucleasas en las muestras durante la extracción. Utilice solo puntas de pipeta con filtro desechables para evitar la contaminación cruzada entre las muestras de los pacientes.

Los resultados analíticos pueden verse afectados por una temperatura exterior considerablemente elevada. Fuera del congelador, mantenga siempre los reactivos y las muestras en bloques de refrigeración.

Los reactivos para la qPCR (Control Solution (violeta) y Target Solution (azul)) son sensibles a la luz y deben protegerse de la luz solar directa. Una exposición excesiva a la luz puede afectar a las sondas fluorescentes.

Los reactivos del M371-Test pueden descongelarse 8 veces como máximo. A partir de entonces, los reactivos no deben reutilizarse.

El M371-Test solo pueden utilizarlo profesionales familiarizados con métodos de obtención de suero/plasma, extracción de RNA y qPCR.

6.2. Precauciones de protección frente a infecciones

Las muestras humanas de sangre y suero/plasma analizadas con esta prueba siempre deben tratarse como potencialmente infecciosas y deben tomarse todas las precauciones requeridas por la directiva de seguridad microbiológica y biológica para laboratorios «Directiva 2000/54/CE, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo» u otras normas relativas a la seguridad biológica.

6.3. Notificación de incidencias relacionadas con el producto

Notifique inmediatamente todas las incidencias o acontecimientos graves relacionados con el producto a mir|detect GmbH (vigilance@mirdetect.de) y a las autoridades pertinentes.

No tome ninguna decisión relevante desde el punto de vista médico sin antes contactar con un profesional sanitario.

6.4. Eliminación del material y los reactivos de trabajo

Ninguno de los reactivos del M371-Test es perjudicial para la salud. Los reactivos caducados y los recipientes de reactivos vacíos pueden eliminarse en el contenedor de residuos domésticos. Deben respetarse las disposiciones legales vigentes en cada región. **No retire nunca la lámina de las placas de qPCR usadas** y asegúrese de que las placas se eliminan íntegras.

Para la manipulación y eliminación de muestras de suero y plasma, así como de los materiales y reactivos utilizados para la extracción de RNA, le rogamos que lea atentamente las instrucciones de uso de los kits correspondientes y las siga al pie de la letra.

7. Control de calidad

De acuerdo con el sistema de gestión de la calidad con certificación ISO 13485 de mir|detect GmbH, todos los lotes del M371-Test se analizan teniendo en cuenta especificaciones predeterminadas para garantizar una calidad del producto homogénea. Esto asegura una baja variabilidad entre lotes. Pueden solicitarse los certificados de los lotes al fabricante.

8. Obtención y procesamiento de las muestras

8.1. Extracción de sangre y conservación de muestras

La extracción de sangre debe ser realizada por personal especializado cualificado, con el fin de reducir los riesgos asociados para el paciente, y la posterior obtención y conservación del suero/plasma deben llevarse a cabo tal y como se describe a continuación.

Notas importantes:

- Llene siempre los tubos de sangre **hasta el volumen nominal**.
- ¡Las muestras de sangre total no deben congelarse, ya que podría producirse hemólisis!

Tabla 4: Resumen del procesamiento, la conservación y el envío de suero y plasma.

	Muestra de suero	Muestra de plasma
Material	Recomendación: • S-Monovette® Serum-Gel CAT 9,0 ml, n.º de artículo 02.1388.001 o • S-Monovette® Serum-Gel CAT 7,5 ml, n.º de artículo 01.1602.001 • No utilizar tubos de plasma, EDTA, heparina o PAXgene	Exclusivamente: S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, n.º de artículo 01.2040.001
Pasos a seguir inmediatamente después de la extracción de sangre	• Agitar varias veces la muestra de sangre en el S-Monovette® Serum-Gel CAT y, a continuación, incubarla en posición vertical a temperatura ambiente durante 30-60 minutos. • Centrifugar durante 10 minutos a 2500 g. • Con la pipeta, trasvasar el suero a un criotubo etiquetado	Es posible el envío directo sin refrigeración al laboratorio en un embalaje exterior adecuado. ¡No guardar en el refrigerador ni en el congelador! Se ha demostrado que la muestra de sangre conservada en el S-Monovette® cfDNA Exact se mantiene estable durante un periodo de hasta 48 horas a una temperatura de hasta 30 °C.
Condiciones de transporte	Congelado, máximo 96 horas.	Transporte a temperatura ambiente, máximo 48 horas.
Obtención de plasma tras la recepción de la muestra en el laboratorio	N. a.	• Centrifugar S-Monovette® cfDNA Exact durante 10 minutos a 2500 g. • Verter el plasma en tubos de reacción adecuados (1,5 ml o 2,0 ml) y centrifugarlo durante 15 minutos a 15.000 g. • Trasvasar el plasma con una pipeta a un tubo criogénico etiquetado.
Condiciones de conservación del suero/plasma separado	• Solo si se tiene previsto realizar la extracción de RNA el mismo día: durante un máximo de 6 horas a una temperatura de entre +2 °C y +8 °C. • A -20 °C durante un máximo de 16 días. • A largo plazo, a -80 °C.	

8.2. Precauciones para la obtención de suero y plasma

En caso de que el suero o el plasma tenga una coloración roja perceptible, se recomienda realizar una medición fotométrica a una absorbancia de 414 nm. Un valor por encima de 0,3 indica un grado de hemólisis potencialmente problemático, que afecta negativamente el resultado analítico del M371-Test (Myklebust et al., 2019). En este caso, es recomendable volver a extraer sangre y eliminar el suero o plasma hemolizado.

Un valor de Ct muy bajo (<12) del miR de referencia también puede indicar la presencia de hemólisis y dificultar la interpretación del resultado (consulte «10.2.2. miR de referencia »).

Si hay alguna indicación de que el suero o el plasma es particularmente graso, déjelo reposar un rato a temperatura ambiente. Esto hará que se forme una capa de grasa que luego podrá eliminarse.

Asegúrese de que la capa de Buffy Coats (leucocítica) que queda por encima de los eritrocitos tras la centrifugación no se destruye o se recoge junto con el suero. Este paso es especialmente importante porque la transferencia de esta capa a la capa de suero constituye la mayor fuente potencial de contaminación con miRNA o RNA celular.

8.3 Extracción de miRNA

Los materiales para la extracción de RNA o miRNA del suero o plasma de los pacientes no se incluyen en el M371-Test.

Para evitar la degradación del material de las muestras durante la extracción del RNA, debe garantizarse el uso de materiales de trabajo sin RNasas, DNasas ni DNA, así como de equipos de protección individual. Además, debe evitarse la contaminación cruzada entre muestras de diferentes pacientes.

Atención: ¡evite incubaciones demasiado largas y descongelaciones reiteradas, ya que podría producirse degradación!

Se recomienda la extracción de RNA mediante los siguientes métodos:

- Para suero y plasma: kit de suero/plasma miRNeasy de QIAGEN GmbH.
- Para suero y plasma: kit de plasma y suero Maxwell® RSC miRNA de Promega
- Solo para plasma: kit de aislamiento de RNA total MagMAX™ mirVana™ con el KingFisher® Apex Dx de Thermo Fisher Scientific

La extracción del RNA debe llevarse a cabo según las instrucciones de uso correspondientes. mir|detect GmbH recomienda realizar la extracción de RNA a partir de **200 µL de suero o plasma**. Para conseguir unos resultados homogéneamente eficientes, siga estrictamente las instrucciones del fabricante del kit de extracción.

- El miRNA extraído puede utilizarse directamente con el M371-Test.
- El miRNA debe almacenarse a -20 °C durante un máximo de 16 días o a -80 °C durante un período más largo.
- **Atención:** ¡debe evitarse la congelación y descongelación reiteradas del miRNA, ya que podría producirse degradación!

9. Realización del M371-Test

Todos los reactivos del kit del M371-Test están listos para llevar a cabo la prueba.

9.1. Realización general de la prueba

Antes de utilizar el M371-Test por primera vez, es recomendable hacer una prueba con muestras conocidas. Si necesita ayuda o asesoramiento, póngase en contacto con **mir|detect GmbH** (formulario de contacto en <https://www.mirdetect.de/Service/>) o **con nuestro socio de distribución a través del cual adquirió el M371-Test.** (17.3. Distribuidores).

Para llevar un seguimiento del funcionamiento homogéneo del M371-Test en todos los laboratorios, mir|detect GmbH recomienda participar en comparaciones periódicas de laboratorios (formulario de contacto a través de <https://www.mirdetect.de/Service/>).

Para que el resultado sea válido, debe incluirse un control negativo (NC) PCR-grade water en cada análisis. Aquí, el control se transcribe en la síntesis de cDNA, pero, a diferencia de una muestra de paciente, se analiza solo en la medición final de miR-371a-3p y miR de referencia.

Notas importantes:

- Los componentes Reverse Transcriptase (amarillo) y RNase Inhibitor (transparente) **no** deben mezclarse en un agitador Vortex. En su lugar, dé golpecitos en el tubo con el dedo. Mezcle los componentes restantes en un agitador Vortex durante unos 3 segundos a aproximadamente 2800 rpm antes de usarlas para conseguir que sean homogéneas.
- Centrifugue todos los reactivos del kit durante unos 3 segundos a aproximadamente 2000 g antes de usarlos para que no queden gotitas en el tapón.
- Retire todas las soluciones del kit de sus condiciones de almacenamiento solo para realizar el M371-Test. Utilice la Mastermix (MM) de síntesis del cDNA directamente después de su preparación. Después de su uso, todas las soluciones deben volver a congelarse inmediatamente o eliminarse los envases vacíos.
- Se recomienda utilizar bloques de refrigeración / cooling racks adecuados para todos los tubos de reacción, incluidas las tiras de 8 pocillos y la placa de 96 pocillos. Estos facilitan la manipulación y garantizan la refrigeración continua de los reactivos.
- Los programas de temperatura (tablas 7, 9 y 10) especifican las condiciones necesarias para las respectivas reacciones. Además, debe activarse la tapa térmica (recomendada: 105 °C). Consulte el manual de instrucciones de su instrumento.

9.2. Realización de la síntesis del cDNA

- Descongele brevemente la cDNA Solution (negro) y el PCR-grade water (blanco) a temperatura ambiente o en el refrigerador.
- Mezcle la cDNA Solution en el agitador Vortex durante aprox. 3 s, centrifugue y guarde en el bloque de refrigeración.
- Mezcle la Reverse Transcriptase (amarilla) y el RNase Inhibitor (transparente) agitando (no mezcle en Vortex), centrifugue y guarde en el bloque de refrigeración.

Realice los pasos siguientes bajo una mesa de laboratorio para preparar PCR limpia.


- Pipetee la Mastermix (MM) de síntesis del cDNA a partir de la cDNA Solution, la Reverse Transcriptase y el RNase Inhibitor en un tubo de reacción adecuado en función del número de muestras. Al hacerlo, observe la proporción de la tabla 5.
- Mezcle la Mastermix (MM) dando golpecitos en el tubo o pipeteando unas cuantas veces y centrifugue brevemente. Guarde la Mastermix (MM) en el bloque de refrigeración.
- Con una pipeta, reparta 9 μ l de la Mastermix (MM) de síntesis del cDNA por muestra y control en los tubos de una tira de 8 (consulte la tabla 6).
- Añada 6 μ l de muestra o control a cada tubo.

Tabla 5: esquema de pipeteo para preparar una Mastermix (MM) de síntesis del cDNA

Reac. = Reacción.

Reactivo \ Mastermix (MM)	Una preparación	MM (2 muestras)
	1 Reac. [μ l]	3 Reac. (incl. el NC y 10% extra) [μ l]
cDNA Solution (negro)	7,81	25,77
Reverse Transcriptase (amarillo)	1,00	3,3
RNase Inhibitor (transparente)	0,19	0,63
Volumen total	9,00	29,7

Tabla 6: distribución de la Mastermix (MM) de síntesis del cDNA y de las muestras en los tubos de reacción de PCR (tiras de 8). Representación del procedimiento para dos muestras y un control negativo (NC).

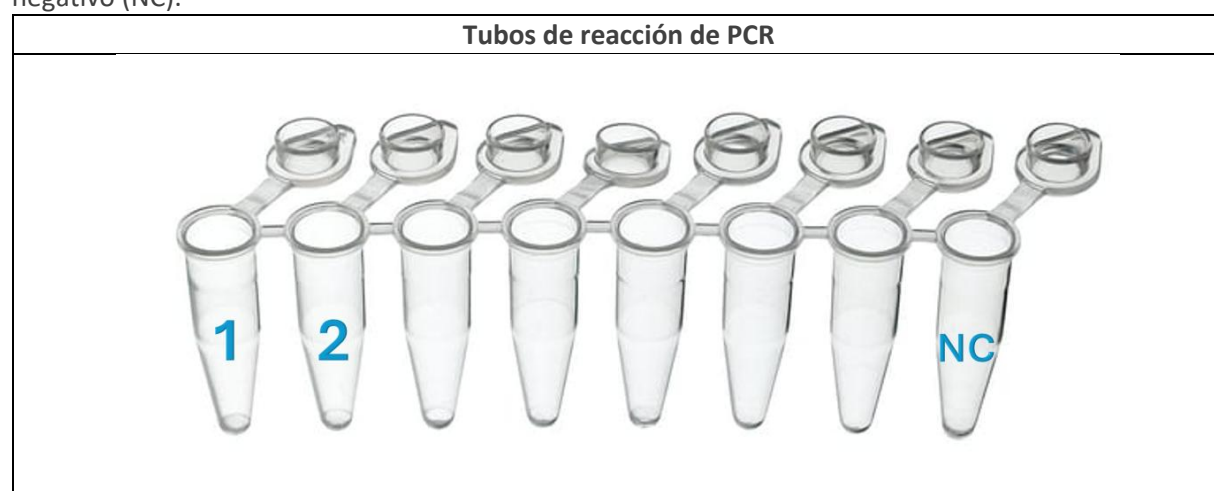

- Mezcle las preparaciones de síntesis de cDNA dando golpecitos en el tubo o pipeteando unas cuantas veces y centrifugue brevemente.
- Incube las mezclas de síntesis de cDNA durante al menos 5 minutos en el refrigerador o en hielo a +4 °C.
- Realice la síntesis de cDNA según la tabla 7. Asegúrese de que la tapa térmica está activada.
- El cDNA obtenido puede conservarse durante la noche en el frigorífico (entre +4 °C y +8 °C). Para una conservación más prolongada, congélelo a -20 °C.

Tabla 7: parámetros del programa de síntesis de cDNA para un instrumento PCR estándar.

Temperatura objetivo [°C]	Duración [hh:mm:ss]	Segmento
16	00:30:00	Hibridación
42	00:30:00	Transcripción inversa
85	00:05:00	Inactivación enzimática
4 hasta 10	∞	Refrigeración

9.3. Realización de la preamplificación

- Descongele brevemente la PreAmp Solution (verde) a temperatura ambiente o en el refrigerador, mezcle durante unos 3 segundos en el agitador Vortex, centrifugue y guarde en el bloque de refrigeración.

Realice los pasos siguientes bajo una mesa de laboratorio para preparar PCR limpia.

- Por cada muestra de paciente, prepare **tres** preparaciones de 16 µl de PreAmp Solution en tiras de PCR de 8 y añada 4 µl cada una del cDNA recién sintetizado (consulte la tabla 8).
- Para el control negativo, basta con **una** PreAmp Solution de 16 µl y una preparación de cDNA de 4 µl.
- Mezcle las preparaciones de preamplificación dando golpecitos en el tubo o pipeteando unas cuantas veces y centrifugue brevemente.
- Realice la preamplificación según la tabla 9. Asegúrese de que la tapa térmica está activada.
- Las preamplificaciones listas para su uso pueden conservarse durante toda la noche en el refrigerador (entre +4 °C y +8 °C). Para una conservación más prolongada, congélelo a -20 °C.

Tabla 8: esquema sobre cómo realizar una preamplificación para dos muestras y un control negativo (NC).

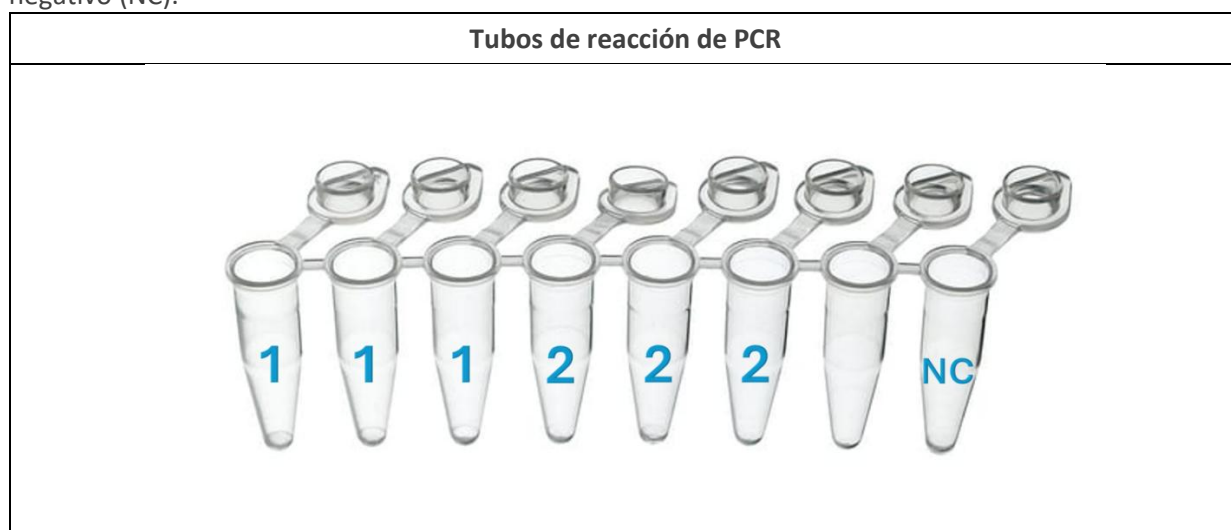


Tabla 9: parámetros del programa de preamplificación para un instrumento PCR estándar.

Ciclos	Temperatura objetivo [°C]	Duración [hh:mm:ss]	Segmento
1	95	00:01:00	Activación enzimática
15	95	00:00:15	Desnaturalización
	60	00:04:00	Hibridación + alargamiento
1	4 hasta 10	∞	Refrigeración

Nota: es importante asegurarse de que se programa el número correcto de ciclos, ya que la entrada de ciclos puede variar en los distintos sistemas de termocicladores de PCR (número total de ciclos o número de repeticiones de ciclos).

9.4. Preparación de las muestras preamplificadas

- Descongele la Target Solution (azul) y la Control Solution (violeta) protegidas de la luz solar directa en el refrigerador o brevemente a temperatura ambiente, también protegidas de la luz solar directa. Descongele PCR-grade water (blanca) a temperatura ambiente. Guarde los reactivos en el bloque de refrigeración.
- Si es necesario, descongele brevemente las muestras preamplificadas a temperatura ambiente o en el refrigerador, centrifugue y guarde en el bloque de refrigeración hasta su uso posterior.

Realice los pasos siguientes bajo una mesa de laboratorio para preparar PCR limpia.

- Para cada muestra de paciente, prepare 60 µl de PCR-grade water (blanca) en un tubo de reacción.
- Añada las tres preparaciones de cada muestra al PCR-grade water (3 × 20 µl de productos de preamplificación = 60 µl + 60 µl de PCR-grade water).
- Para el control negativo, prepare 20 µl de PCR-grade water en un tubo de reacción y añada los productos de preamplificación correspondientes.

9.5. Asignación de la placa qPCR

- Mezcle la Target Solution (azul) y la Control Solution (violeta) durante unos 3 segundos en el agitador Vortex, centrifugue y guarde en el bloque de refrigeración.
- Se necesitan seis pocillos para cada muestra de paciente (tres para la Target Solution y tres para la Control Solution). Dos pocillos para cada control negativo (consulte la figura 1).
- Pipetee 15 µl de la Target Solution o de la Control Solution en las posiciones correspondientes de la placa qPCR.
- Mezcle los productos preamplificados diluidos en el mezclador Vortex durante unos 3 segundos antes de utilizarlos, centrifugue y guarde en el bloque de refrigeración
- Pipetee 5 µl de los productos preamplificados diluidos en las posiciones correspondientes de la placa qPCR.
- Selle la placa qPCR con un cubreobjetos óptico y alísela sin burbujas con un aplicador de láminas.
- Centrifugue la placa PCR con una centrífuga de placas (al menos 2 minutos (en total) a 500 g).

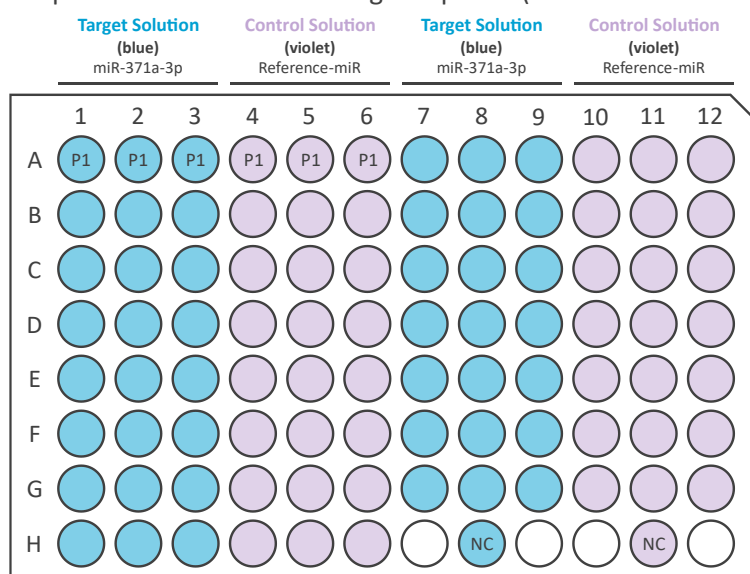


Figura 1: asignación de la placa recomendada de la placa qPCR para la medición de una muestra (M1) y un control negativo (NC).

9.6. Cargar la placa qPCR

Consulte la información del fabricante relativa a la programación de su termociclador de PCR en tiempo real.

- Cree un programa qPCR en el programa informático del termociclador de qPCR de acuerdo con la tabla 10.
- Se pueden mantener las velocidades máximas de calefacción y refrigeración específicas de cada instrumento (tabla 11).
- La qPCR debe configurarse como cuantificación relativa. Además del Target miR-371a-3p, el miRNA de referencia sirve como control endógeno para la normalización.
- Deben realizarse los siguientes ajustes generales:
Volumen de reacción: 20 µl
Canal de detección: FAM
- Abra la tapa de carga del instrumento qPCR y coloque la placa qPCR en el marco. Asegúrese de que la placa encaja exactamente en el marco. Cierre la tapa de carga.
- Inicie el análisis de qPCR y dé al análisis un nombre único.
- Al final del experimento, retire la placa qPCR del instrumento qPCR y elimínela sin retirar la lámina protectora.

Característica especial de LightCycler® 480II y cobas® z 480 (Roche): en los esquemas de asignación de placas, las muestras en las mediciones paralelas de miR-371a-3p y miR de referencia deben definirse como triplicados entre sí.

- En el punto «Sample Editor (editor de muestras)», las tres preparaciones para cada muestra de paciente y cada miRNA deben marcarse como réplicas. Para ello, seleccione tres posiciones en cada caso y pulse el botón «Make Replicates (hacer réplicas)».
- Ej.: A1-A3 = una réplica, A4-A6 = una réplica (consulte la figura 1)

Tabla 10: perfil de temperatura de la qPCR.

Número de ciclos	Paso	Temperatura [°C]	Duración [mm:ss]	Detección
1	Activación de la polimerasa	95	10:00	
40	Desnaturalización	95	00:15	
	Hibridación/alargamiento	60	01:00	Medición de la fluorescencia al final de cada ciclo
1	Refrigeración	37	01:00	

Tabla 11: velocidades de calefacción y refrigeración específicas del instrumento de los termocicladores de qPCR validados.

Termociclador de qPCR	Velocidad máxima de calefacción y refrigeración [°C/s]
LightCycler® 480 II	4,4 (calefacción), 2,2 (refrigeración)
LightCycler® PRO	4,4 (calefacción), 2,2 (refrigeración)
cobas® z 480	4,4 (calefacción), 2,2 (refrigeración)
QuantStudio™ 5	3,28 (calefacción), 2,52 (refrigeración)
QuantStudio™ 5 Dx	3,28 (calefacción), 2,52 (refrigeración)
AriaDx	6,0
CFX96™	4,4 (calefacción), 2,2 (refrigeración)

10. Análisis de resultados

Nota: Cp (= Crossing point, punto de cruce) y Ct (= crossing threshold, punto de corte o umbral) son términos idénticos e intercambiables. En las presentes Instrucciones de uso se utiliza el término Ct.

Una vez finalizada la qPCR, antes de evaluar los valores de Ct, se debe comprobar que las curvas de amplificación sigan la típica curva sigmoidea.

10.1. Archivo de evaluación del M371-Test e importación de los datos

El archivo de evaluación del M371-Test es un programa informático opcional que se envía en formato electrónico por **correo electrónico** previa solicitud a través del formulario de contacto de nuestro sitio web (<https://www.mirdetect.de/Service/>). El archivo denominado «M371-Test Evaluation File» solo está disponible en inglés. Debe utilizarse siempre la última versión del archivo de evaluación del M371-Test para una evaluación fiable y segura. Tan pronto como esté disponible una nueva versión, se informará por correo electrónico a los clientes que ya hayan recibido el archivo de evaluación. Para garantizar un uso seguro, el archivo de evaluación del M371-Test contiene áreas bloqueadas **que no pueden ni deben modificarse**. Las celdas editables se resaltan en verde claro, como el nombre de las muestras y el área para insertar los datos de la qPCR. Después de introducir los datos del análisis de qPCR en el archivo de evaluación del M371-Test, se calcula automáticamente la abundancia relativa (RQ) del miR-371a-3p y se muestra el resultado de la prueba.

10.2. Análisis de resultados

Ajustes del análisis:

Tabla 12: ajustes del análisis específicos del instrumento.

Termociclador de qPCR	Umbral	Línea de base
LightCycler® 480 II	Abs Quant/2nd Derivative Max	El ciclo inicial y final deben seleccionarse para no tener en cuenta el ruido inicial de la señal y para que la línea de base termine antes de que se detecte una fluorescencia significativa.
LightCycler® PRO	Baseline Subtracted	
cobas® z 480	Abs Quant/2nd Derivative Max	
QuantStudio™ 5	Auto threshold	
QuantStudio™ 5 Dx	Auto threshold	
Aria Dx	Auto threshold	
CFX96™	Baseline Subtracted Curve Fit	

A continuación se describe el análisis de resultados con el archivo opcional de evaluación del M371-Test. El procedimiento aquí descrito se refiere al LightCycler® 480 II qPCR Instrument de Roche Diagnostics con bloque calefactor de 96 pocillos y versión de software 1.5.x. Cuando utilice otros termocicladores de qPCR validados, asegúrese de que los valores Median Ct se transfieren correctamente a la pantalla de entrada del M371-Test. Los ajustes del análisis específicos del instrumento de los sistemas de termocicladores de qPCR validados pueden verse en la tabla 12.

- En el programa informático LightCycler® 480, seleccione el experimento anterior y haga clic en la pestaña «Analysis» (análisis).
- Seleccione «Abs Quant/2nd Derivative Max» (cuant. abs./máx. 2.ª derivada) para todas las muestras y haga clic en «OK».
- Seleccione «Median» (mediana) en lugar de «Mean» (media) en el menú desplegable de la parte inferior derecha y haga clic en «Calculate» (calcular) en la parte inferior izquierda.
- La mediana de los valores de Ct de miR-371a-3p y el miR de referencia se calcula automáticamente para cada muestra y se muestra en «Replicate Statistics» (estadísticas de las réplicas), en la parte inferior izquierda.
- Todos los resultados de la tabla de resultados «Replicate Statistics» (estadísticas de las réplicas) deben transferirse al archivo de evaluación del M371-Test. Para ello, haga clic en el campo «Replicate Statistics» (estadísticas de las réplicas), marque todos los datos con Ctrl + A y, a continuación, copie los datos con Ctrl + C.
- Cambie al archivo de evaluación del M371-Test y siga las instrucciones que allí se indican para la transferencia de datos.
- Los resultados del control negativo para la medición de miR-371a-3p y el miR de referencia deben introducirse manualmente en el archivo de evaluación. Manteniendo el cursor (puntero del ratón) sobre la posición del pocillo correspondiente en el programa informático LightCycler®, se muestra el valor Ct medido.
- El archivo de evaluación contiene columnas de resultados separadas para el diagnóstico primario y el seguimiento. Debido a los diferentes umbrales, los resultados de estas columnas pueden diferir. **Hay que tener cuidado de leer el resultado de la columna correspondiente al escenario respectivo.**

10.2.1. Control negativo

En cada análisis de qPCR, debe utilizarse un control negativo (NC, PCR-grade water) tanto para la medición de miR-371a-3p como para la del miR de referencia, a fin de confirmar el buen funcionamiento del test.

Un análisis de qPCR es **VALID** (válido) si tanto el control negativo de miR-371a-3p como el control negativo del miR-referencia dan como resultado **NEGATIVO**. El control negativo da como resultado negativo si el valor de Ct de ambos miRNA medidos es de al menos 10 ciclos más que el valor más alto del miRNA correspondiente de una muestra o es igual o superior a 35.

Un análisis de qPCR es **INVALID** (inválido) si el control negativo da **POSITIVO**. El control negativo de la determinación del miR-371a-3p y del miR de referencia es positivo si el valor de Ct para el miRNA medido específicamente es inferior a 10 ciclos posterior al valor más alto de una muestra.

Si los controles negativos dan **POSITIVO**, las muestras procesadas junto con estos controles **no** pueden evaluarse. Si pasa esto, debe repetirse el M371-Test con todas las muestras.

El archivo de evaluación del M371-Test indica si todos los controles cumplen los requisitos (controles del ➔ archivo de evaluación del M371-Test: CN miR371 y CN miR de referencia).

10.2.2. miR de referencia

El miR de referencia indica si había suficiente cantidad de miRNA en cada muestra. El resultado de qPCR del miR-371a-3p depende del resultado del miR de referencia.

El rango normal para el valor de Ct del miR de referencia con el LightCycler® 480 II Instrument está entre 12 y 22. En este caso, hay suficiente miRNA y los resultados son válidos.

Si el valor de Ct del miR de referencia de una muestra es **superior a 22**, significa que la cantidad inicial tras la extracción del RNA es muy baja, lo que puede dar lugar a un diagnóstico ambiguo.

Si el valor de Ct del miR de referencia de una muestra es **inferior a 12**, es posible que haya habido hemólisis y, por lo tanto, no puede confirmarse el estado del tumor tomando como base esta muestra.

Las muestras de pacientes con un valor de Ct del miR de referencia inferior a 12 o superior a 22 deben volver a obtenerse y procesarse con el M371-Test.

10.2.3. Evaluación de las pruebas

La evaluación de los resultados de test en función del escenario clínico se describe en el capítulo «2. Fundamentos tecnológicos del procedimiento de prueba».

11. Guía de resolución de problemas (Troubleshooting Guide)

- Si un control negativo de un análisis de qPCR no cumple los requisitos, debe repetirse el análisis completo (incluso el control negativo del miR-371a-3p y del miR de referencia).
- Las señales no deseadas en los controles negativos pueden deberse a una tapa térmica no activada durante la síntesis del cDNA o la preamplificación. Los cambios de concentración no deseados se producen debido a la condensación en las tapas de los tubos de reacción. Para evitarlo, debe programarse una temperatura de la tapa térmica de 105 °C.
- Si el valor de Ct del miR de referencia de una muestra es superior a 22, esta muestra debe volver a obtenerse y a procesarse con el M371-Test porque la cantidad del material de partida era insuficiente.
- Si el valor de Ct del miR de referencia de una muestra es inferior a 12, esta muestra debe volver a obtenerse y a procesarse con el M371-Test porque probablemente la muestra original estaba hemolizada.
- Si la RQ de una muestra del **diagnóstico primario** es de entre 5 y 10 (rango indeterminado), vuelva a extraer sangre del paciente al cabo de un tiempo y repita la medición.
- Si las curvas de amplificación no siguen la típica curva sigmoidea, debería centrifugar la placa qPCR durante un poco más de tiempo en el siguiente ciclo.
- Programa informático LightCycler® 480 II: si falta la tabla «Replicate Stats (estadísticas de las réplicas), compruebe si las réplicas de una muestra de paciente están asignadas entre sí como réplicas.

12. Limitaciones del procedimiento

- La prueba solo es apropiada para diagnóstico *in vitro*.
- La prueba está diseñada exclusivamente para la detección de tumores testiculares de células germinales de tipo II (Germ Cell Neoplasia *in situ* derived GCTs).
- El test no ha demostrado ninguna función pronóstica (predicción de recidiva tras la intervención), pero puede utilizarse para el seguimiento de pacientes con tumores testiculares.
- Hay indicios de que, tras una orquiectomía, la normalización de los niveles de miR-371a-3p por debajo del umbral tarda bastante tiempo, a pesar de su corta vida media. Incluso en ausencia de tumor, los resultados de las pruebas postoperatorias pueden ser positivos si el intervalo de tiempo entre la intervención quirúrgica y la toma de muestras no ha sido lo suficientemente largo. En este caso, se recomienda repetir el M371-Test más adelante. La cinética de la normalización postoperatoria es objeto de un estudio en curso.
- Solo se validaron los termocicladores de qPCR mencionados en el capítulo «5.1. Material general de laboratorio».
- El test se ha desarrollado para el análisis del miR-371a-3p en suero o plasma. Para las muestras de suero, se recomienda utilizar el S-Monovette® Serum-Gel CAT de 7,5 ml (n.º de art. 01.1602.001) o de 9 ml (n.º de art. 02.1388.001) de Sarstedt AG & Co. KG. Para el plasma, solo está autorizado el S-Monovette® cfDNA Exact de 9,2 ml (n.º de artículo 01.2040.001) de Sarstedt AG & Co. KG.
- Deben observarse las indicaciones para la obtención y procesamiento de muestras que figuran en el capítulo «8. Obtención y procesamiento de las muestras»
- Este producto solo puede ser utilizado por personas con experiencia en la realización de pruebas PCR.
- El resultado de la prueba no puede utilizarse como único diagnóstico primario de un tumor testicular de células germinales ni para detectar recidivas. Todo M371-Test positivo debe confirmarse mediante un procedimiento de diagnóstico clínico adecuado.
- El resultado del M371-Test debe evaluarse en el contexto de otros parámetros clínicos.
- Los teratomas puros no muestran prácticamente ninguna expresión aumentada del marcador tumoral miR-371a-3p-3p, por lo que esta entidad tumoral no es detectable (Dieckmann et al., 2017; 2019).
- El miR de referencia se expresa de forma aumentada en el tejido cerebral de los enfermos de Alzheimer (Song et al., 2019). Actualmente se desconoce si esto también se aplica a la concentración del miR de referencia en el suero o plasma de estos pacientes. En este caso, pueden producirse resultados falsos negativos.
- Un aumento de la hemólisis provoca un aumento de la liberación del miR de referencia detectado en la prueba. Esto da lugar a una reducción considerable de los valores Ct del miR de referencia, lo que puede conducir a valores RQ falseados y, en el peor de los casos, a un resultado falso negativo de la prueba (Myklebust et al., 2019).
- No puede descartarse que miR-371a-3p se exprese a un nivel aumentado en los pacientes con Covid-19 (Goebel et al., 2022).
- En el suero de los pacientes con mieloma múltiple se observan niveles, en algunos casos muy elevados, de miR-371a-3p (Belge et al., 2025).

13. Datos de rendimiento específicos

13.1. Rendimiento analítico

13.1.1. Sensibilidad analítica

La menor diferencia cuantificable en los valores de RQ y Ct se calculó mediante 3 niveles de dilución de muestras de miRNA mimico compuestas por miR-371a-3p y miR de referencia. Cada dilución se midió en 10 réplicas con un lote del kit. La diferencia cuantificable más pequeña detectada fue de 0,52 pmol/l.

13.1.2. Especificidad analítica

Se midieron tres muestras diferentes simuladas de pacientes (con expresión alta, media y sin expresión de miR-371a-3p) con contaminación alta, baja y sin contaminación (DNA, contaminación proteínica). Se utilizó el mismo lote del M371-Test para todas las mediciones. Los resultados se examinaron mediante análisis de regresión.

El valor Ct de miR-371a-3p aumentó en las muestras de alta expresión debido a la contaminación. Esto puede dar lugar a un RQ más bajo ($p=0,005$, $R^2=0,698$).

En las muestras de expresión moderada, la contaminación DNA/proteína dio lugar a valores Ct significativamente más altos de miR-371a-3p y miR de referencia, así como a valores RQ ($p=0,001$, $R^2=0,798$; $p=0,004$, $R^2=0,711$; $p=0,001$, $R^2=0,812$).

A la vista de los resultados, debe prestarse especial atención a la correcta extracción de miRNA según el protocolo del fabricante para evitar la posible contaminación de la muestra de un paciente.

13.1.3. Límite de detección y cuantificación (LoD, LoQ)

El límite de detección (LoD) y el límite de cuantificación (LoQ) del M371-Test se determinaron en una serie de dilución de miR-371a-3p con seis niveles de dilución y del miR de referencia a concentración constante con seis réplicas cada uno. Todas las mediciones se realizaron con un solo lote del M371-Test.

El límite de detección (LoD) se definió de antemano de forma que al menos 5/6 diluciones debían ser detectables. Este fue el caso en el experimento hasta una concentración de 7,575 fM. El coeficiente de variación fue del 77,33 %.

El límite de cuantificación (LoQ) se definió de antemano para que el coeficiente de variación fuera como máximo del 50 %. Este fue el caso hasta una concentración de 30,3 fM. Para esta concentración, el coeficiente de variación es del 44,07 %. El valor RQ medio en el LoD es de 1,05; el valor RQ medio en el LoQ es de 8,71. Esto significa que el LoQ está justo por encima del valor de corte de RQ = 5. Dado que los valores por debajo de 8,71 no pueden cuantificarse con precisión, el valor umbral para el diagnóstico primario se amplió a un rango de umbral que incluye valores de RQ de 5 a 10. Los valores dentro de este rango no pueden medirse con precisión y se consideran indeterminados (INDETERMINATE).

13.1.4. Linealidad

Para la medición de la linealidad, se diluyó una muestra de miRNA mimico 1:10 seis veces a una concentración de 500 pM. Cada dilución fue medida tres veces de forma independiente por el mismo operador utilizando un lote del M371-Test en días diferentes. De ello se desprende una eficiencia de la PCR del 90 % de media, con un coeficiente de correlación (R^2) de entre 0,993 y 0,997. Al observar los valores de miR-371a-3p-Ct, se encontraron concentraciones de entre 5 fM y 500 fM en el rango lineal. A una concentración de 0,5 fM, el miR-371a-3p no era detectable.

13.2. Precisión

13.2.1. Precisión de repetición

La reproducibilidad de los resultados de la prueba se determinó analizando repetidamente muestras a cuatro concentraciones diferentes (alta, media, baja y sin expresión de miR-371a-3p). Cada muestra se procesó en 30 réplicas utilizando un lote del operador del M371-Test. El coeficiente de variación para las muestras de expresión alta y media es aproximadamente del 14 %. Para las muestras de baja expresión, el coeficiente de variación es de hasta el 85 %, por lo que debe tenerse en cuenta el límite de cuantificación en la evaluación. Las muestras que representan a pacientes libres de tumores pueden tener un coeficiente de variación del 127 %. Esto se observó a una concentración de 5 fM. Como esta concentración está por debajo del límite de detección (7,575 fM), un coeficiente de variación más alto no es problemático.

13.2.2. Precisión comparativa

Para determinar la precisión comparativa, se estudiaron los parámetros siguientes:

- Distintos operadores
- Distintos fungibles (placas de qPCR)
- Distintos laboratorios (distintos termocicladores de PCR y qPCR [LightCycler® 480II])

Se midieron cuatro concentraciones diferentes de muestras por operador en dos réplicas (alta, media, baja y sin expresión de miR-371a-3p). Se midieron cuatro concentraciones (alta, media, baja y sin expresión de miR-371a-3p) por tipo de placa con cuatro réplicas cada una. Se midieron cuatro concentraciones (alta, media, baja y sin expresión de miR-371a-3p) por laboratorio con cuatro réplicas cada una.

Los operadores y fungibles, como las placas de qPCR, no afectaron de forma significativa la RQ de las muestras analizadas ($p = 0,09 - 0,33$, Kruskal Wallis o $p = 0,25 - 0,81$, U de Mann-Whitney U). Al comparar dos laboratorios, se encontró una diferencia significativa en el rango superior de la RQ ($p = 0,014$, U de Mann-Whitney en el rango RQ 200-2000). Sin embargo, esto no afectó al rango límite de decisión clínica ($RQ = 10$) y se situó en el rango de 21-22 % para el coeficiente de variación.

13.3. Eficacia clínica

La eficacia clínica del M371-Test se demostró en un estudio multicéntrico llevado a cabo en 37 hospitales de Alemania, Austria, Suiza, Hungría e Italia (Dieckmann et al., 2019). En el estudio, se analizaron muestras de suero de 616 pacientes con tumores de células germinales y de 258 pacientes control con el M371-Test. Para determinar la eficacia clínica para el diagnóstico primario, se compararon muestras de 522 pacientes con tumores, incluidos 323 seminomas y 199 no seminomas, con muestras de 258 pacientes de control.

En el diagnóstico primario de los tumores de células germinales, el M371-Test mostró una sensibilidad del 91,8 % y una especificidad del 96,1 %. El AUC (área bajo la curva ROC) fue de 0,970 y el valor predictivo positivo del 97,2 % (tabla 13).

Tabla 13: parámetros de eficacia clínica del M371-Test (de Dieckmann et al. 2019).

Grupo	AUC	Sensibilidad	Especificidad	PPV*	NPV*	LR+	LR-
GCT (n=522) vs. controles (n=258)	0,970 (0,958 – 0,981)	91,8 (89,1 – 94,0)	96,1 (93,0 – 98,1)	97,2 (92,9 – 99,2)	82,7 (74,0 – 89,45)	23,675 (12,89 – 43,49)	0,086 (0,06 – 0,11)
Seminoma (n = 323) vs. controles (n=258)	0,964 (0,949 – 0,979)	89,8 (85,9 – 92,8)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
No seminomas (n=199) vs. controles (n=258)	0,978 (0,962 – 0,994)	95,0 (91,0 – 97,6)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
CS I (n=371) vs. controles (n=258)	0,958 (0,942 – 0,974)	88,9 (85,3 – 92,0)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
CS II/III (n=151) vs. controles (n=258)	0,998 (0,995 – 1,0)	98,7 (95,3 – 99,8)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
Recidivas (n=46) vs. controles (n=258)	0,921 (0,862 – 0,981)	82,6 (68,6 – 92,2)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-

*Los parámetros de eficacia clínica PPV y NPV parten de una n = 155 de GCT y una n = 90 de controles. AUC: Area under the curve (área bajo la curva); CS: Clinical stage (estadio clínico); GCT: Germ cell tumor (tumor de células germinales); LR+: Positive likelihood ratio (razón de probabilidad positiva); LR-: Negative likelihood ratio (razón de probabilidad negativa); PPV: Positive predictive value (valor predictivo positivo); NPV: Negative predictive value (valor predictivo negativo). Valores entre paréntesis = intervalo de confianza del 95 %.

Se pudieron determinar correctamente las recidivas de los pacientes con GCT en 10 de 10 y en 4 de 4 recidivas, respectivamente, usando el aumento de la expresión del miR-371a-3p (Dieckmann et al., 2017; van Agthoven et al., 2017). Otro grupo demostró que había un aumento de la expresión del miR-371a-3p durante la recidiva en muestras de 10 pacientes con TGCT (Terbuch et al., 2018).

Dieckmann et al. obtuvieron una sensibilidad del 83 % en n = 46 recidivas de TGCT con normalización de los niveles séricos de miR-371a-3p tras un tratamiento eficaz para la recidiva (Dieckmann et al., 2019). Rosas Plaza X et al. también observaron un aumento del miR-371a-3p al producirse recidiva (Rosas Plaza et al., 2019).

En una serie de n = 151 pacientes con TGCT en estadio clínico 1, Lobo et al. se encontraron con n = 34 casos de recidiva. De estos, pudieron detectar n = 32 (94 %) con la medición del miR-371a-3p, mientras que el patrón oro clásico (AFP y β -hCG) solo aumentó en el 38 % de los casos (Lobo et al., 2020).

La fiabilidad con la que la expresión del miR-371a-3p es indicadora de recidiva fue corroborada más adelante por Fankhauser et al. En un estudio con 30 pacientes, se detectó un aumento de la expresión

del miR-371a-3p en 10/10 pacientes con recidiva, mientras que la cantidad de miR-371a-3p incrementó solo en un paciente sin recidiva (Fankhauser et al., 2022). Este aumento ya se había normalizado en la siguiente determinación, lo que apunta a que, incluso después de un aumento de la expresión, debe hacerse un seguimiento de la cantidad de miR-371a-3p mediante otra determinación. Las recidivas pudieron detectarse, de mediana, 2 meses antes que con los métodos convencionales; en un paciente, incluso se pudo detectar 5 meses antes (Fankhauser et al., 2022).

El estudio actualmente más exhaustivo sobre la eficacia del M371-Test en el seguimiento de pacientes con tumores germinales testiculares en estadio clínico I incluyó a 258 pacientes y se les observó durante un periodo medio de 18 meses. El test fue positivo en los 39 pacientes que desarrollaron una recidiva durante este periodo. Las recidivas se detectaron con una sensibilidad del 100 %, mientras que se alcanzó una especificidad del 96,3 % (Belge et al., 2024). Debe tenerse en cuenta que en este estudio de seguimiento se utilizó una expresión relativa de RQ = 15 como umbral para la detección de recidivas, lo que difiere del umbral utilizado en el diagnóstico primario (RQ = 5, Dieckmann et al., 2019) (consulte también «2. Fundamentos tecnológicos del procedimiento de prueba»). Aunque los marcadores séricos clásicos β -hCG y AFP pudieron detectar recidivas con una especificidad del 91,8 %, sólo alcanzaron una sensibilidad del 45,2 %. En la tabla 14 se resumen más detalles sobre la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo del M371-Test en comparación con los marcadores séricos clásicos en el seguimiento de pacientes con tumores de células germinales en estadio clínico I.

Tabla 14. Características de eficacia clínica del M371-Test en el seguimiento de pacientes con GCT en estadio clínico I en comparación con los marcadores séricos clásicos (de Belge et al., 2024).

Marcador	Recidivas confirmadas clínicamente				Casos sin recidiva				PPV [%]	NPV [%]
	n	VP	FN	Sensibilidad [%]	n	VN	FP	Especificidad [%]		
M371, todos los GCT	39	39	0	100,0 (100,0 – 100,0)	219	211	8	96,3 (93,9 – 98,8)	83,0 (72,2 – 93,7)	100,0 (100,0 – 100,0)
M371, S	17	17	0	100,0 (100,0 – 100,0)	172	166	6	96,5 (93,8 – 99,3)	73,9 (56,9 – 91,8)	100,0 (100,0 – 100,0)
M371, NS	22	22	0	100,0 (100,0 – 100,0)	47	45	2	95,7 (92,9 – 100,0)	91,7 (80,7 – 100,0)	100,0 (100,0 – 100,0)
β -hCG	31	11	20	35,5 (19,2 – 54,6)	196	192	4	98,0 (94,9 – 99,4)	73,3 (51,0 – 95,7)	90,6 (86,6 – 94,5)
AFP	32	8	24	25,0 (11,5 – 43,4)	196	184	12	93,9 (89,5 – 96,8)	40,0 (18,5 – 61,5)	88,5 (84,1 – 92,8)
β -hCG / AFP	31	14	17	45,2 (27,3 – 64,0)	196	180	16	91,8 (87,1 – 95,3)	46,7 (28,8 – 64,5)	91,4 (87,4 – 95,3)

GCT: tumor de células germinales, S: seminoma, NS: no seminoma, β -hCG/AFP: casos con al menos un marcador sérico positivo β -hCG y/o AFP, n: número de casos registrados, VP: verdadero positivo, FN: falso negativo, VN: verdadero negativo, FP: falso positivo, NPV: valor predictivo negativo, PPV: valor predictivo positivo. Valores entre paréntesis = intervalo de confianza del 95 %.

Con plasma como matriz de muestra, el M371-Test ofrece unos resultados diagnósticos comparables. Según los conocimientos actuales, la sensibilidad del plasma es del 92,5 %, mientras que se alcanza una especificidad del 100 % (Heidenreich et al., 2026).

13.4. Interferencia

13.4.1. Hémolisis

Un aumento de la hemólisis provoca un aumento de la liberación del miR de referencia detectado en la prueba. Esto da lugar a una reducción considerable de los valores Ct del miR de referencia, lo que puede conducir a valores RQ falseados y, en el peor de los casos, a un resultado falso negativo de la prueba. Se analizaron 20 sueros de pacientes para determinar la hemólisis mediante tinción y mediante medición fotométrica (414 nm). Cada muestra se midió simplemente utilizando el M371-Test. El grado de hemólisis tuvo un efecto significativo en la medición del miR de referencia ($p=0,002$). Un mayor grado de hemólisis dio lugar a un valor Ct inferior del miR de referencia ($R^2=0,437-0,743$).

13.4.2. Otros estados médicos

- En pacientes con enfermedad de Alzheimer, se observaron concentraciones elevadas del miR de referencia en el tejido cerebral (Song et al., 2019). Por el momento se desconoce si en el suero o el plasma de estos pacientes también hay concentraciones elevadas del miR de referencia que pudieran falsear el resultado del test.
- Según un estudio, se han observado valores elevados aislados de miR-371a-3p en el suero de pacientes con COVID-19 (Goebel et al., 2022).
- En el suero de los pacientes con mieloma múltiple se observan niveles, en algunos casos muy elevados, de miR-371a-3p (Belge et al., 2025).

13.4.3. Reactividad cruzada

Se ha comprobado si las siguientes sustancias interfieren con el M371-Test: contaminación por DNA, proteínas, EDTA, citratos, heparina, secuencias similares de miR (miR-372-3p).

Para las pruebas de interferencia se utilizó CLSI Interference Testing in Clinical Chemistry 3rd ed. Inicialmente, se dividió una muestra de suero para cada interferente en dos grupos, uno de los cuales se enriqueció con una concentración de interferente tres veces superior a la que cabría esperar normalmente. El otro grupo no se enriqueció con interferente y sirvió de control. Cada grupo se midió en 7 réplicas. Si la diferencia en el resultado superaba un nivel predeterminado (50 %) del grupo de prueba con respecto al grupo de control, se realizaba un experimento de dosis-respuesta.

La contaminación con DNA, proteínas y heparina mostró una influencia sobre la RQ y el resultado de la prueba incluso a niveles muy bajos de contaminación.

Aunque los métodos recomendados de aislamiento de miRNA y similares eliminan el DNA y las proteínas de las muestras de suero, el incumplimiento del protocolo del fabricante puede dar lugar a la contaminación de las muestras de los pacientes con DNA o proteínas. Esta contaminación puede dar lugar a resultados falsificados. mir|detect GmbH recomienda encarecidamente, por tanto, seguir los protocolos del fabricante.

Como incluso pequeñas cantidades de heparina pueden influir en los resultados de las muestras de los pacientes, mir|detect GmbH recomienda el uso de S-Monovette® Serum-Gel CAT o de S-Monovette® cfDNA Exact (ambos de Sarstedt AG & Co. KG) para la extracción de sangre y la obtención de suero o plasma.

No puede descartarse la detección de más interferencias en el futuro.

13.5. Summary of Safety and Performance (Resumen de seguridad y eficacia)

El resumen más reciente de la seguridad y la eficacia («Summary of Safety and Performance») puede consultarse a través de EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home>) o solicitarse a través del formulario de contacto en www.mirdetect.de/Service.

14. Explicación de los símbolos

El uso de los símbolos se sustenta en la norma DIN EN ISO 15223-01:2021 (Productos sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar - Parte 1: Requisitos generales (ISO 15223-1:2016, versión corregida 2017-03); versión alemana EN ISO 15223-1:2016). Los símbolos y su significado se muestran a continuación (consulte la tabla 15).

Tabla 15: símbolos utilizados y descripción del significado

	Marcado CE + código del organismo notificado (XXXX)
	Diagnóstico <i>in vitro</i>
	Siga las instrucciones de uso electrónicas
	Número de artículo
	Número de lote
	Información sobre el UDI
	Representante autorizado (XX = código específico del país o la región)
	Fabricante
	Distribuidor
	Suficiente para <n> ensayos
	Proteger de la luz solar directa
	Intervalo de temperaturas
	Fecha de caducidad
	No utilizar si el envase está dañado

15. Cambios en las instrucciones de uso anteriores

15.1. Cambios con respecto a la versión 15

- Sustitución del símbolo de instrucciones de uso (ISO 7000-1641) por el símbolo de instrucciones de uso electrónicas (ISO 7000-3500).
- Se añade la posibilidad de utilizar plasma obtenido con S-Monovette® cfDNA Exact (capítulos 1, 2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 8, 12, 13.4.2 y 13.4.3).
- Incorporación del kit de aislamiento de RNA total MagMAX™ mirVana™ con KingFisher® Apex Dx (Thermo Fisher Scientific) (para plasma) y el kit de plasma y suero Maxwell® RSC miRNA de Promega como método adicional para el aislamiento de RNA en los capítulos 5.2 y 8.3.
- Resumen en forma de tabla sobre la obtención y la manipulación de muestras en el capítulo 8.1.
- Nueva referencia a Heidenreich et al., 2026, en el capítulo 13.3.
- Capítulo 17.3 «Distribuidores»: nueva referencia a la lista de distribuidores en el sitio web de mir|detect GmbH.

16. Referencias

Belge G, Dumlapinar C, Nestler T, Klemke M, Törzsök P, Trenti E, Pichler R, Loidl W, Che Y, Hiester A, Matthies C, Pichler M, Paffenholz P, Kluth L, Wenzel M, Sommer J, Heinzelbecker J, Schriefer P, Winter A, Zengerling F, Kramer MW, Lengert M, Frey J, Heidenreich A, Wülfing C, Radtke A, Dieckmann KP. Detection of recurrence through microRNA-371a-3p serum levels in a follow-up of stage I testicular germ cell tumors in the DRKS-00019223 study. Clin Cancer Res. 2024; 30: 404-412. doi: [10.1158/1078-0432.CCR-23-0730](https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-23-0730).

Belge G, Klemke M, Hansen B, Dumlapinar C, Igde A, Arnold D, Salwender H, Wülfing C, Soave A, Dieckmann KP. Biomarker microRNA-371a-3p - expression in malignancies other than germ-cell tumours. J Cancer Res Clin Oncol. 2025; 151: 58. doi: [10.1007/s00432-025-06101-4](https://doi.org/10.1007/s00432-025-06101-4).

Dieckmann KP, Radtke A, Spiekermann M, Balks T, Matthies C, Becker P, Ruf C, Oing C, Oechsle K, Bokemeyer C, Hammel J, Melchior S, Wosniok W, Belge G. Serum Levels of MicroRNA miR-371a-3p: A Sensitive and Specific New Biomarker for Germ Cell Tumours. Eur Urol. 2017; 71: 213-220. doi: [10.1016/j.eururo.2016.07.029](https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.07.029).

Dieckmann KP, Radtke A, Geczi L, Matthies C, Anheuser P, Eckardt U, Sommer J, Zengerling F, Trenti E, Pichler R, Belz H, Zastrow S, Winter A, Melchior S, Hammel J, Kranz J, Bolten M, Krege S, Haben B, Loidl W, Ruf CG, Heinzelbecker J, Heidenreich A, Cremers JF, Oing C, Hermanns T, Fankhauser CD, Gillessen S, Reichegger H, Cathomas R, Pichler M, Hentrich M, Eredics K, Lorch A, Wülfing C, Peine S, Wosniok W, Bokemeyer C, Belge G. Serum Levels of MicroRNA-371a-3p (M371-Test) as a New Biomarker of Testicular Germ Cell Tumors: Results of a Prospective Multicentric Study. J Clin Oncol. 2019; 37: 1412-1423. doi: [10.1200/JCO.18.01480](https://doi.org/10.1200/JCO.18.01480).

Fankhauser CD, Christiansen AJ, Rothermundt C, Cathomas R, Wettstein MS, Grossmann NC, Grogg JB, Templeton AJ, Hirschi-Blickenstorfer A, Lorch A, Gillessen S, Moch H, Beyer J, Hermanns T. Detection of recurrences using serum miR-371a-3p during active surveillance in men with stage I testicular germ cell tumours. Br J Cancer. 2022; 126: 1140-1144. doi: [10.1038/s41416-021-01643-z](https://doi.org/10.1038/s41416-021-01643-z).

Goebel H, Koeditz B, Huerta M, Kameri E, Nestler T, Kamphausen T, Friemann J, Hamdorf M, Ohrmann T, Koehler P, Cornely OA, Montesinos-Rongen M, Nicol D, Schorle H, Boor P, Quaas A, Pallasch C,

Heidenreich A, von Brandenstein M. COVID-19 Infection Induce miR-371a-3p Upregulation Resulting in Influence on Male Fertility. *Biomedicines*. 2022; 10: 858. doi: [10.3390/biomedicines10040858](https://doi.org/10.3390/biomedicines10040858).

Heidenreich A, Niemzok T, Kämper M, Belge G, Klemke M, Dieckmann KP, Diesend J. Measuring microRNA-371a-3p in testicular germ cell tumors-making the test ready for clinical routine practice. *Discov Oncol*. 2026; 17: 840. doi: [10.1007/s12672-026-05345-x](https://doi.org/10.1007/s12672-026-05345-x).

Lobo J, Leão R, Gillis AJM, van den Berg A, Anson-Cartwright L, Atenafu EG, Kuhathaas K, Chung P, Hansen A, Bedard PL, Jewett MAS, Warde P, O'Malley M, Sweet J, Looijenga LHJ, Hamilton RJ. Utility of Serum miR-371a-3p in Predicting Relapse on Surveillance in Patients with Clinical Stage I Testicular Germ Cell Cancer. *Eur Urol Oncol*. 2020: S2588-9311(20)30180-2. doi: [10.1016/j.euo.2020.11.004](https://doi.org/10.1016/j.euo.2020.11.004).

Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta C(T)) Method. *Methods*. 2001; 25: 402-408. doi: [10.1006/meth.2001.1262](https://doi.org/10.1006/meth.2001.1262).

Myklebust MP, Rosenlund B, Gjengstø P, Bercea BS, Karlsdottir Á, Brydøy M, Dahl O. Quantitative PCR Measurement of miR-371a-3p and miR-372-p Is Influenced by Hemolysis. *Front. Genet*. 2019; 10: 463. doi: [10.3389/fgene.2019.00463](https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00463).

Rosas Plaza X, van Agthoven T, Meijer C, van Vugt MATM, de Jong S, Gietema JA, Looijenga LHJ. miR-371a-3p, miR-373-3p and miR-367-3p as Serum Biomarkers in Metastatic Testicular Germ Cell Cancers Before, During and After Chemotherapy. *Cells*. 2019; 8: 1221. doi: [10.3390/cells8101221](https://doi.org/10.3390/cells8101221).

Song Y, Hu M, Zhang J, Teng ZQ, Chen C. A novel mechanism of synaptic and cognitive impairments mediated via microRNA-30b in Alzheimer's disease. *EBioMedicine*. 2019; 39: 409-421. doi: [10.1016/j.ebiom.2018.11.059](https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.11.059).

Terbuch A, Adiprasito JB, Stiegelbauer V, Seles M, Klec C, Pichler GP, Resel M, Posch F, Lembeck AL, Stöger H, Szkandera J, Pummer K, Bauernhofer T, Hutterer GC, Gerger A, Stotz M, Pichler M. MiR-371a-3p Serum Levels Are Increased in Recurrence of Testicular Germ Cell Tumor Patients. *Int J Mol Sci*. 2018; 19: 3130. doi: [10.3390/ijms19103130](https://doi.org/10.3390/ijms19103130).

van Agthoven T, Eijkenboom WMH, Looijenga LHJ. microRNA-371a-3p as informative biomarker for the follow-up of testicular germ cell cancer patients. *Cell Oncol (Dordr)*. 2017; 40: 379-388. doi: [10.1007/s13402-017-0333-9](https://doi.org/10.1007/s13402-017-0333-9).

17. Información para el comprador

17.1. Fabricante



mir|detect GmbH
Fischkai 1
27572 Bremerhaven, Alemania

Para más información o asistencia técnica, visite nuestra página web o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono:

Sitio web: <https://www.mirdetect.de>
Correo electrónico: info@mirdetect.de
Teléfono: +49 (0) 421 / 40 89 37 11-0

17.2. Marcas

Todas las marcas comerciales, marcas y nombres mencionados en este documento son propiedad de las empresas respectivas.

17.3. Distribuidores



Puede consultar la lista de nuestros socios distribuidores en nuestro sitio web:
<https://www.mirdetect.de>

18. Anexo

18.1. Plantillas para calcular los volúmenes de la Mastermix (MM) de síntesis del cDNA

Tabla 16: esquema de pipeteo para preparar una Mastermix de síntesis del cDNA para 2, 3, 4 y 5 muestras (incl. un 10% extra), Reac. = Reacciones

Mastermix (MM) Reactivo	MM (2 muestras)	MM (3 muestras)	MM (4 muestras)	MM (5 muestras)
	3 Reac. (incl. el NC y extra) [μl]	4 Reac. (incl. el NC y extra) [μl]	5 Reac. (incl. el NC y extra) [μl]	6 Reac. (incl. el NC y extra) [μl]
cDNA Solution (negro)	25,77	34,36	42,96	51,55
Reverse Transcriptase (amarillo)	3,3	4,4	5,5	6,6
RNase Inhibitor (transparente)	0,63	0,84	1,05	1,25
Volumen total	29,7	39,6	49,5	59,4