

M371-Test

Dispositif médical de diagnostic in vitro –
Utilisation réservée aux professionnels

REF MCS0105

REF MCS0115HT

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le test et le suivre scrupuleusement afin de garantir la fiabilité des résultats du test.



Version 16, © mir|detect GmbH, au 1er septembre 2026.



mir|detect GmbH, Fischkai 1,
27572 Bremerhaven, Allemagne
www.mirdetect.de

Table des matières

1. Nom et domaine d'application du produit.....	4
2. Bases technologiques de la procédure de test	4
3. Réactifs contenus dans le kit	6
3.1. Composants.....	6
3.2. Composants réactifs du M371-Test	7
3.3. Informations et documents sur le M371-Test.....	7
3.4. Accessoires en option pour le M371-Test.....	7
3.5. Substances dangereuses et ingrédients d'origine animale dans le kit de M371-Test	7
4. Transport, stockage et stabilité.....	8
5. Équipement supplémentaire nécessaire.....	9
5.1. Équipement général de laboratoire	9
5.2. Consommables et réactifs généraux	9
5.3. Conditions que doit réunir le produit.....	10
6. Mesures de précaution	10
6.1. Mesures de précaution au laboratoire.....	10
6.2. Précautions à prendre pour se protéger des infections.....	10
6.3. Notification d'événements liés au produit.....	11
6.4. Élimination des matériaux de travail et des réactifs	11
7. Contrôles de la qualité	11
8. Prélèvement et traitement des échantillons.....	12
8.1. Prélèvement sanguin et conservation des échantillons.....	12
8.2. Précautions à prendre lors du prélèvement de sérum et de plasma.....	13
8.3. Extraction de miARN	13
9. Réalisation du M371-Test.....	14
9.1. Réalisation générale du test.....	14
9.2. Réalisation de la synthèse de l'ADNc	15
9.3. Réalisation de la préamplification.....	17
9.4. Préparation des échantillons préamplifiés.....	18
9.5. Occupation de la plaque qPCR	18
9.6. Chargement de la plaque qPCR.....	19
10. Résultat des analyses	20
10.1. Fichier d'évaluation du M371-Test et importation de données	20
10.2. Résultat des analyses	21
10.2.1. Témoins négatifs	22

10.2.2. miR de référence	22
10.2.3. Évaluation des échantillons.....	22
11. Guide de dépannage (Troubleshooting Guide).....	23
12. Limites de la procédure.....	24
13. Données spécifiques de performances	25
13.1. Performances analytiques.....	25
13.1.1. Sensibilité analytique	25
13.1.2. Spécificité analytique	25
13.1.3. Limite de détection et de quantification (LoD, LoQ).....	25
13.1.4. Linéarité.....	26
13.2. Précision	26
13.2.1. Précision de la reproductibilité	26
13.2.2. Précision de comparaison	26
13.3. Performances cliniques	27
13.4. Interférences	29
13.4.1. Hémolyse.....	29
13.4.2. Autres états de santé	29
13.4.3. Réactivité croisée	30
13.5. Summary of Safety and Performance (rapport succinct sur la sécurité et les performances) 30	
14. Signification des symboles	31
15. Modifications par rapport aux modes d'emploi précédents	32
15.1. Modifications par rapport à la version 15.....	32
16. Références bibliographiques.....	32
17. Informations pour l'acheteur	34
17.1. Fabricant.....	34
17.2. Marques déposées	34
17.3. Distributeurs.....	34
18. Annexe.....	35
18.1. Modèles pour la préparation du mastermix de synthèse de l'ADNc (MM).....	35

1. Nom et domaine d'application du produit

Le M371-Test est un dispositif médical de diagnostic in vitro (DIV) certifié selon le règlement (UE) 2017/746 IVDR, basé sur la mesure de la fréquence relative (RQ) du marqueur tumoral miR-371a-3p. Pour ce faire, le miR-371a-3p et un contrôle endogène sont quantifiés par qPCR dans 200 µl de sérum ou de plasma sanguin.

Le M371-Test est un test non automatique avec une interprétation qualitative des résultats, qui détecte la présence de tumeurs germinales testiculaires (TCG, type II, en anglais Germ Cell Neoplasia in situ derived testicular germ cell tumor (GCNIS-derived TGCT)) et peut être utilisé pour le diagnostic et le suivi (en anglais « follow-up monitoring ») de cette tumeur par des utilisateurs spécialisés. La population testée comprend des patients adultes de sexe masculin chez qui une tumeur germinale testiculaire (type II, GCNIS-derived TGCT) est suspectée ou confirmée. Le résultat du test ne peut pas être utilisé comme seul diagnostic primaire d'une tumeur germinale testiculaire ou pour détecter une récurrence. Tout M371-Test positif doit être confirmé par une procédure de diagnostic clinique appropriée.

2. Bases technologiques de la procédure de test

Le kit de M371-Test contient tous les réactifs nécessaires à la réalisation du test sanguin de détection des tumeurs germinales du testicule à partir de miARN déjà extraits. Pour l'évaluation des échantillons, le fichier d'évaluation du M371-Test en option est mis à disposition.

La méthode de détection est basée sur la détection par fluorescence du microARN (miARN) miR-371a-3p par PCR quantitative en temps réel. Pour mesurer ce marqueur tumoral, il faut isoler l'ARN, y compris les miARN, à partir de l'échantillon du patient (sérum ou plasma). Les réactifs pour cette première étape d'isolement ne sont **pas** inclus dans le kit.

Dans l'étape suivante, le marqueur tumoral miR-371a-3p, ainsi qu'un miARN supplémentaire servant de contrôle endogène (ci-après : miR de référence), sont transcrits en ADNc à l'aide d'amorces spécifiques. Dans l'étape de préamplification suivante, l'ADNc est amplifié dans une PCR (preamplification). Ensuite, la fréquence relative du marqueur tumoral miR-371a-3p est déterminée par PCR quantitative et normalisée par rapport au miR de référence. Plus un signal de fluorescence peut être détecté tôt pendant la qPCR, plus les molécules du marqueur tumoral ou du miR de référence étaient présentes dans l'échantillon. Ces valeurs sont reproduites sous forme de valeurs « Ct ». La fréquence relative (RQ) du miR-371a-3p est calculée selon la méthode $\Delta\Delta Ct$ (Livak & Schmittgen, 2001) par le miR de référence et une valeur fixe (calibrateur). Pour cela, la valeur ΔCt est d'abord calculée pour chaque échantillon : $\Delta Ct = Ct(\text{miR-371a-3p}) - Ct(\text{miR de référence})$. On calcule ensuite la différence entre la valeur ΔCt de l'échantillon et la valeur ΔCt du calibrateur, dont l'expression relative du miR-371a-3p est égale à 1 : $\Delta\Delta Ct = \Delta Ct(\text{échantillon}) - \Delta Ct(\text{calibrateur})$. L'expression relative est calculée par la formule suivante : $RQ = 2^{-\Delta\Delta Ct}$. La valeur RQ est un multiple de l'expression du calibrateur. Ces calculs peuvent être effectués par le fichier d'évaluation mis à disposition en option (« M371-Test Evaluation file », voir chapitre 3.4. Accessoires en option pour le M371-Test) après le transfert correct des valeurs Ct mesurées.

Les résultats du M371-Test doivent être évalués en tenant compte du scénario clinique, selon que le test est utilisé pour établir un diagnostic primaire ou pour détecter les récurrences dans le cadre du suivi des patients atteints d'une tumeur testiculaire (tableau 1). Dans le cadre d'un diagnostic primaire, il n'est pas possible de se prononcer clairement pour les échantillons dont la fréquence relative est

comprise entre 5 et 10 (INDETERMINATE), car c'est là que se situe la zone de la limite de quantification du test. Dans ce cas, un nouveau M371-Test doit être effectué avec un échantillon frais quelques semaines plus tard.

Tableau 1 : interprétation des résultats du M371-Test en fonction du scénario clinique.

Diagnostic primaire (détection des tumeurs primaires)	
RQ < 5	Négatif, faible probabilité de tumeur
$5 \leq \text{RQ} < 10$	Indéterminé (INDETERMINATE), répétition après quelques semaines
$\text{RQ} \geq 10$	Positif, probabilité élevée de tumeur
Suivi (détection des récurrences)	
RQ < 15	Négatif, faible probabilité de récurrence
$\text{RQ} \geq 15$	Positif, grande probabilité de récurrence

Pour de plus amples explications sur les preuves scientifiques, voir le chapitre « 13. Données spécifiques de performances » de ce mode d'emploi.

Chaque cycle est effectué avec un contrôle négatif (CN). Pour l'évaluation et la validité des contrôles, voir le chapitre « 10. Résultat des analyses » de ce mode d'emploi.

3. Réactifs contenus dans le kit

3.1. Composants

Le M371-Test est proposé en deux variantes (numéro d'article MCS0105 et numéro d'article MCS0115HT).

Numéro d'article MCS0105 – contient des réactifs pour cinq échantillons de patients et cinq contrôles négatifs. L'utilisateur peut mesurer chaque échantillon individuellement avec un contrôle négatif (voir tableau 2).

ATTENTION : dans ce cas, le contrôle négatif n'est mesuré **qu'une seule fois** en préamplification et en qPCR !

Tableau 2 : contenu du kit de M371-Test MCS0105.

Réactif	Récipient	Volume [µl]
cDNA Solution (noir)	1 tube	90
Reverse Transcriptase (jaune)	1 tube	13,12
RNase Inhibitor (transparent)	1 tube	2,49
PreAmp Solution (vert)	1 tube	350
Target Solution (bleu)	1 tube	328
Control Solution (violet)	1 tube	328
PCR-grade water (blanc)	1 tube	1000

Numéro d'article MCS0115HT – contient des réactifs pour quinze échantillons de patients et un contrôle négatif. L'utilisateur doit alors mesurer tous les échantillons en **un seul** passage (voir tableau 3).

Tableau 3 : contenu du kit de M371-Test MCS0115HT.

Réactif	Récipient	Volume [µl]
cDNA Solution (noir)	1 tube	153
Reverse Transcriptase (jaune)	1 tube	22,30
RNase Inhibitor (transparent)	1 tube	4,24
PreAmp Solution (vert)	1 tube	786
Target Solution (bleu)	1 tube	770
Control Solution (violet)	1 tube	770
PCR-grade water (blanc)	1 tube	1000

3.2. Composants réactifs du M371-Test

cDNA Solution (noir)

- Amorces de tiges-boucles spécifiques aux miARN pour les miARN cibles et de référence

Reverse Transcriptase (jaune)

- Transcriptase inverse

PreAmp Solution (vert)

- Amorces spécifiques aux miARN pour les miARN cibles et de référence
- ADN-polymérase

Target Solution (bleu)

- Amorces spécifiques aux miARN et sonde pour le miARN cible
- ADN polymérase

Control Solution (violet)

- Amorces spécifiques aux miARN et sonde pour le miARN de référence
- ADN polymérase

3.3. Informations et documents sur le M371-Test

Le mode d'emploi et les tutoriels vidéo pour réaliser le test sont disponibles sur le site mir|detect à l'adresse <https://www.mirdetect.de/download>. Lorsqu'un mode d'emploi révisé est publié, les clients sont informés par e-mail de la nouvelle version. Il est possible de se procurer une version papier du mode d'emploi sur demande, via le formulaire de prise de contact que l'on trouve sur notre site Internet (<https://www.mirdetect.de/Service/>) ou de le demander par mail.

3.4. Accessoires en option pour le M371-Test

Le fichier d'évaluation du M371-Test (« M371-Test Evaluation File » ; disponible uniquement en anglais) est un tableur optionnel contenant des formules déposées pour l'évaluation des échantillons et est transmis sous forme électronique (par e-mail). Les versions actualisées sont également envoyées par e-mail.

3.5. Substances dangereuses et ingrédients d'origine animale dans le kit de M371-Test

Les composants PreAmp Solution, Target Solution et Control Solution contiennent du formamide en très faible concentration. Tous les composants du M371-Test ne sont pas nocifs pour la santé.

En vertu de la Directive 1999/45/CE et des Règlements (CE) 1907/2006 et 1272/2008, il n'est pas obligatoire que le M371-Test soit accompagné d'une fiche de données de sécurité, car il contient moins de 1 % de constituants classifiés comme étant dangereux, et pas plus de 0,1 % de constituants classifiés comme cancérogènes. C'est la raison pour laquelle la société mir|detect GmbH ne fournit pas de fiche de données de sécurité pour ce produit.

Même si le fait de travailler avec ces substances chimiques ou bien d'autres substances nécessite de porter systématiquement des gants de protection, une tenue adaptée ainsi que des lunettes de


protection, mir|detect GmbH décline toute responsabilité si des dégâts matériels et/ou des blessures venaient à survenir suite à l'utilisation de ce produit ou d'un contact avec ce produit.

Une matière première utilisée pour la fabrication de la Target Solution et de la Control Solution contient de la gélatine animale. Le fabricant de la matière première assure que le risque de contamination par l'ESB/EST est négligeable.

De plus, le risque est minimisé par l'utilisation de vêtements de protection (gants, blouse de laboratoire et lunettes de protection, voir chapitre « 6. Mesures de précaution ») et par le travail sous un banc PCR pendant la réalisation du M371-Test. Le M371-Test ne doit être effectué que par des utilisateurs spécialisés.

4. Transport, stockage et stabilité

L'envoi du M371-Test se fait à $< 0^{\circ}\text{C}$ par envoi express. **En cas de dommage pendant le transport, veuillez vous adresser immédiatement à l'entreprise de transport et à mir|detect GmbH ou notre partenaire de distribution auprès de qui vous vous êtes procuré le M371-Test.** Les coordonnées sont indiquées au chapitre « 17. Informations pour l'acheteur ». Les tubes de réactifs endommagés ne doivent pas être utilisés et immédiatement mis au rebut. Ce principe s'applique également aux kits qui n'auraient pas été suffisamment réfrigérés pendant leur transport. Les composants de différents lots de kits ne doivent pas être mélangés.

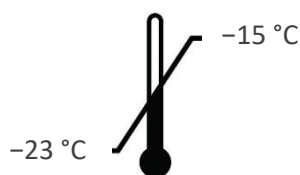

Conservez tous les réactifs du kit entre -23°C et -15°C avant et après la première ouverture. Protégez la Target Solution (bleu) et la Control Solution (violet) de l'exposition à la lumière. Chaque composant peut être décongelé et recongelé jusqu'à huit fois.



Utilisable au maximum jusqu'à la date de péremption indiquée à l'extérieur du kit si les conditions de stockage sont respectées (durée de conservation maximale possible : dix mois). N'utilisez aucun matériau après la date de péremption.

5. Équipement supplémentaire nécessaire

5.1. Équipement général de laboratoire

L'équipement de laboratoire suivant est nécessaire pour réaliser le M371-Test.

- Accessoires en option : fichier d'évaluation du M371-Test (« M371-Test Evaluation file »)*
- Banc de travail PCR
- Instrument PCR standard
- Bloc de refroidissement pour les microtubes utilisés
- Mélangeur à vortex
- Pipette à volume variable de taille appropriée
- En option : distributeur électronique
- Centrifugeuse de paillasse avec un rotor pour microtubes de 0,2/1,5 ml
- Centrifugeuse pour plaques PCR
- Instrument PCR en temps réel**

* Le fichier d'évaluation pour le M371-Test a été validé avec Microsoft Excel pour Microsoft 365 MSO.

** Le M371-Test a été validé avec les cycles PCR en temps réel suivants :

- Instrument LightCycler® 480 II qPCR (Roche Diagnostics) avec bloc chauffant à 96 puits
- Instrument cobas® z 480 qPCR (Roche Diagnostics) avec bloc chauffant à 96 puits
- Instrument LightCycler® PRO qPCR (Roche Diagnostics) avec bloc chauffant à 96 puits
- QuantStudio™ 5 (Thermo Fisher Scientific) avec bloc chauffant à 96 puits
- QuantStudio™ 5 (Thermo Fisher Scientific) avec bloc chauffant à 96 puits
- AriaDx (Agilent) avec bloc chauffant à 96 puits
- Instrument CFX96™ qPCR (BioRad) avec bloc chauffant à 96 puits

5.2. Consommables et réactifs généraux

Tous les consommables utilisés doivent être en polypropylène et exempts de RNases, DNases, ADN et inhibiteurs de PCR.

- Tube de prélèvement sanguin*
- Cryotubes, autoportants
- Kit d'extraction miARN**
- Tubes à réaction de 1,5 ml à fond conique et couvercle de sécurité (polypropylène)
- Microtubes PCR de 0,2 ml (par exemple bandelettes de 8)
- Embouts de pipettes avec filtre
- En option : embout pour distributeur électronique
- Plaques PCR avec film adhésif
- Appliqueur pour le collage de films adhésifs

* nécessaire à l'obtention de sérum ou de plasma. Pour le sérum, il est recommandé d'utiliser le Sarstedt AG & Co. KG S-Monovette® Serum-Gel CAT (7,5 ml ou 9 ml). Pour le plasma, utiliser **exclusivement** le S-Monovette® cfDNA Exact (9,2 ml) ; pour plus d'informations sur le prélèvement de sérum ou de plasma, se reporter au chapitre « 8. Prélèvement et traitement des échantillons ».

** nécessaire pour l'extraction des miARN. Il est recommandé de procéder à l'extraction de l'ARN à l'aide des méthodes suivantes :

- Pour le sérum et le plasma : miRNeasy Serum/Plasma Kit de QIAGEN GmbH

- Pour le sérum et le plasma : Maxwell® RSC miRNA Plasma and Serum Kit de Promega
- Uniquement pour le plasma : kit d'isolation d'ARN total MagMAX™ mirVana™ avec le KingFisher® Apex Dx de Thermo Fisher Scientific

5.3. Conditions que doit réunir le produit

L'installation, l'étalonnage, la qualification fonctionnelle et la maintenance de tous les appareils et équipements utilisés doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant et relèvent de la responsabilité de l'utilisateur du test. Il est également chargé de définir les procédures de contrôle de la qualité.

6. Mesures de précaution

L'utilisateur professionnel est responsable du respect des prescriptions de laboratoire applicables. Portez toujours une blouse de laboratoire appropriée, des gants jetables et des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des produits chimiques.

6.1. Mesures de précaution au laboratoire

Les réglementations telles que la norme DIN EN ISO 17025 ou DIN EN ISO 15189 doivent être respectées afin d'éviter le risque de contamination croisée des échantillons de patients avant, pendant et après l'extraction de l'ARN. Empêchez l'introduction de nucléases dans les échantillons pendant l'extraction. Utilisez uniquement des embouts de pipette à usage unique avec filtre afin d'éviter toute contamination croisée entre les échantillons des patients.

Les résultats de mesure peuvent être influencés par une forte augmentation de la température extérieure. En dehors des congélateurs, conservez toujours les réactifs et les échantillons dans des blocs réfrigérés.

Les réactifs pour la qPCR (Control Solution (violet) et Target Solution (bleu)) sont sensibles à la lumière et doivent donc être conservés à l'abri de la lumière. Une exposition excessive à la lumière peut affecter les sondes fluorescentes.

Les réactifs du M371-Test peuvent être décongelés jusqu'à huit fois. En outre, les réactifs ne doivent pas être réutilisés.

Le M371-Test ne doit être réalisé que par des utilisateurs professionnels maîtrisant les méthodes de prélèvement de sérum/plasma, d'extraction d'ARN et de qPCR.

6.2. Précautions à prendre pour se protéger des infections

Les échantillons de sang et de sérum humains analysés à l'aide de ce test doivent toujours être traités comme potentiellement infectieux et toutes les précautions doivent être prises, conformément à la « directive 2000/54/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail », ou à d'autres réglementations sur la sécurité biologique.

6.3. Notification d'événements liés au produit

Tout incident ou événement grave en rapport avec le produit doit être immédiatement signalé à mir|detect GmbH (vigilance@mirdetect.de) et aux autorités compétentes.

Veillez ne pas prendre de décisions médicales importantes sans avoir consulté au préalable un professionnel de la santé.

6.4. Élimination des matériaux de travail et des réactifs

Tous les réactifs du M371-Test ne sont pas nocifs pour la santé. Les réactifs périmés ou les récipients de réactifs vides peuvent être éliminés avec les déchets résiduels. Les dispositions locales doivent être respectées. Veuillez ne **jamais retirer le film des plaques qPCR** utilisées et veiller à les éliminer sans les endommager.

Pour la manipulation et l'élimination des échantillons de sérum et de plasma, ainsi que pour le matériel et les réactifs utilisés pour l'extraction de l'ARN, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans les modes d'emploi des kits correspondants et les respecter scrupuleusement.

7. Contrôles de la qualité

En accord avec le système de gestion de la qualité certifié ISO 13485 de mir|detect GmbH, chaque lot du M371-Test est testé selon des spécifications prédéfinies afin de garantir une qualité constante du produit. Cela permet de maintenir la variabilité d'un lot à l'autre à un faible niveau. Les certificats de lots sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

8. Prélèvement et traitement des échantillons

8.1. Prélèvement sanguin et conservation des échantillons

Pour réduire les risques associés pour le patient, le prélèvement sanguin doit être effectué par un professionnel qualifié, et le prélèvement le stockage du sérum et du plasma doivent être effectués comme décrit ci-dessous.

Notes importantes :

- Veuillez toujours remplir les tubes de prélèvement **jusqu'au volume nominal**.
- **Les échantillons de sang total ne doivent pas être congelés**, car cela entraîne une hémolyse !

Tableau 4 : Aperçu du traitement, du stockage et de l'expédition du sérum et du plasma.

	Échantillon de sérum	Sonde à plasma
Matériau	Recommandation : • Gel-sérum S-Monovette® CAT 9,0 ml, réf. 02.1388.001 ou • Gel-sérum S-Monovette® CAT 7,5 ml, réf. 01.1602.001 • Ne pas utiliser de tubes de plasma, d'EDTA, d'héparine ou de PAXgene	Uniquement : S-Monovette® cfDNA Exact, 9,2 ml, réf. 01.2040.001
Étapes à suivre immédiatement après le prélèvement sanguin	• Inverser plusieurs fois le sang dans le gel-sérum S-Monovette® CAT, puis laisser incuber 30 à 60 minutes à température ambiante, en position verticale • Centrifuger pendant 10 minutes à 2 500 g. • Pipeter le sérum dans un cryotube étiqueté	Expédition directe sans réfrigération vers le laboratoire possible, dans un suremballage adapté. Ne pas conserver au réfrigérateur ni au congélateur ! La stabilité de l'échantillon sanguin dans le S-Monovette® cfDNA Exact a été démontrée pendant une durée pouvant aller jusqu'à 48 heures à une température maximale de 30 °C.
Conditions de transport	Congelé, 96 heures maximum.	Transport à température ambiante, 48 heures maximum.
Préparation du plasma après réception de l'échantillon par le laboratoire	N. a.	• Centrifuger le S-Monovette® cfDNA Exact pendant 10 minutes à 2 500 g. • Transférer le plasma dans des tubes à réaction adaptés (1,5 ou 2,0 ml) et les centrifuger pendant 15 minutes à 15 000 g. • Pipeter le plasma dans un cryotube étiqueté.
Conditions de conservation du sérum/plasma séparé	• Uniquement si l'extraction d'ARN est prévue le jour même : pendant 6 heures maximum à une température comprise entre +2 et +8 °C. • À -20 °C pendant 16 jours maximum. • À long terme, à -80 °C.	

8.2. Précautions à prendre lors du prélèvement de sérum et de plasma

En cas de coloration rouge inhabituelle du sérum ou du plasma, il est recommandé d'effectuer une mesure photométrique à une absorption de 414 nm. Une valeur supérieure à 0,3 indique un degré d'hémolyse qui peut être problématique et qui a un impact négatif sur le résultat du M371-Test (Myklebust et al., 2019). Dans ce cas, il est recommandé de procéder à un nouveau prélèvement sanguin et d'éliminer le sérum ou le plasma hémolytique.

Une valeur Ct très basse <12 du miR de référence peut également indiquer la présence d'une hémolyse et fausser le résultat (voir chapitre « 10.2.2. miR de référence »).

S'il semble que le sérum ou le plasma soit particulièrement riche en matières grasses, laissez-le reposer un moment à température ambiante. Il se forme alors une couche de graisse qui peut ensuite être retirée avec précaution.

Veillez à ce que la couche de Buffy Coats (film leucocytaire) ne soit pas détruite ou transférée en même temps que les globules rouges après l'étape de centrifugation. Cette étape est particulièrement importante, car un transfert représente la plus grande source possible de contamination par des miARN ou ARN cellulaires.

8.3. Extraction de miARN

Le matériel nécessaire à l'extraction de l'ARN ou des miARN à partir du sérum ou du plasma des patients n'est pas fourni avec le M371-Tests.

Pour éviter la dégradation de l'échantillon pendant l'extraction de l'ARN, il faut veiller à utiliser des outils de travail et des équipements de protection individuelle exempts de RNase, de DNase et d'ADN. De plus, il faut éviter les contaminations croisées entre les échantillons des patients.

Attention : évitez les incubations prolongées et les décongélations répétées, car cela peut entraîner des dégradations !

Il est recommandé de procéder à l'extraction de l'ARN à l'aide des méthodes suivantes :

- Pour le sérum et le plasma : miRNeasy Serum/Plasma Kit de QIAGEN GmbH
- Pour le sérum et le plasma : kit pour le plasma et le sérum Maxwell® Maxwell® RSC miRNA de Promega
- Uniquement pour le plasma : kit d'isolation d'ARN total MagMAX™ mirVana™ avec le KingFisher® Apex Dx de Thermo Fisher Scientific

L'extraction de l'ARN se fait selon le mode d'emploi correspondant. mir|detect GmbH recommande de procéder à l'extraction d'ARN à partir de **200 µL de sérum ou de plasma**. Pour garantir une extraction efficace et constante, il convient de suivre strictement les instructions du fabricant pour le kit d'extraction.

- Le miARN extrait peut être utilisé directement pour réaliser le M371-Test.
- Le miARN peut se conserver à -20 °C pendant une durée allant jusqu'à 16 jours, ou plus longtemps à -80 °C.
- **Attention :** les cycles répétés de congélation et de décongélation des miARN doivent être évités, car ils peuvent entraîner des dégradations !

9. Réalisation du M371-Test

Tous les réactifs du kit de M371-Test sont « prêts à l'emploi » et directement utilisables pour la réalisation du test.

9.1. Réalisation générale du test

Avant d'utiliser le M371-Test pour la première fois, il est recommandé de faire un essai avec des échantillons connus. Pour obtenir de l'aide et des conseils, contactez **mir|detect GmbH** (formulaire de prise de contact sur <https://www.mirdetect.de/Service/>) ou **notre partenaire de distribution auprès de qui vous vous êtes procuré le M371-Test.** (17.3. Distributeurs).

Pour la surveillance et la réalisation équivalente du M371-Test dans tous les laboratoires, mir|detect GmbH recommande la participation à des comparaisons régulières entre laboratoires (formulaire de contact via <https://www.mirdetect.de/Service/>).

Un contrôle négatif (NC) de PCR-grade water doit être traité dans chaque cycle pour assurer sa validité. Dans ce cas, le contrôle est réécrit dans la synthèse de l'ADNc, mais, contrairement à un échantillon de patient, il est simplement analysé dans la mesure finale du miR-371a-3p et du miR de référence.

Notes importantes :

- Les composants Reverse Transcriptase (jaune) et RNase Inhibitor (transparent) ne doivent **pas** être mélangés avec un mélangeur à vortex. Au lieu de cela, tapoter le tube avec le doigt. Avant d'utiliser les autres composants, les mélanger pendant environ 3 secondes à environ 2 800 tours/minute sur un mélangeur à vortex afin de garantir une solution homogène.
- Centrifuger toutes les solutions du kit avant leur utilisation pendant environ 3 secondes à 2 000 g pour éliminer les gouttes sur le couvercle.
- Retirer toutes les solutions du kit de leurs conditions de stockage uniquement pour effectuer le M371-Test. Utilisez le mastermix (MM) de synthèse de l'ADNc directement après sa préparation. Après utilisation, toutes les solutions doivent être recongelées immédiatement ou les récipients vides doivent être éliminés.
- Il est recommandé d'utiliser des blocs de refroidissement / cooling racks appropriés pour tous les microtubes, y compris les bandelettes de 8 et la plaque de 96 puits. Ceux-ci facilitent la manipulation et garantissent un refroidissement continu des réactifs.
- Les programmes de température (Tab. 7, 9 et 10) indiquent les conditions nécessaires pour chaque réaction. En outre, le couvercle chauffant doit être activé (recommandé : 105 °C). Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil.

9.2. Réalisation de la synthèse de l'ADNc

- Décongeler brièvement la cDNA Solution (noir) et la PCR-grade water (blanc) à température ambiante ou au réfrigérateur.
- Mélanger la cDNA Solution sur le mélangeur à vortex pendant env. 3 sec., centrifuger et stocker dans le bloc réfrigérant.
- Mélanger la Reverse Transcriptase (jaune) et le RNase Inhibitor (transparent) en les tapotant (ne pas passer au vortex), centrifuger et stocker dans le bloc réfrigérant.

Effectuez les étapes suivantes sous un banc PCR propre.

- Pipetter ensemble le mastermix (MM) pour la synthèse de l'ADNc composé de la cDNA Solution, de la Reverse Transcriptase et du RNase Inhibitor dans un microtube approprié en fonction du nombre d'échantillons. Respecter le rapport indiqué dans le tableau 5.
- Mélanger et centrifuger le mastermix (MM) en le tapotant ou en le pipettant plusieurs fois. Stocker le mastermix (MM) dans le bloc de refroidissement.
- Introduire à la pipette 9 µl de mastermix (MM) de synthèse d'ADNc par échantillon de patient et par contrôle dans une bandelette PCR de 8 (voir tableau 6).
- Ajouter 6 µl d'échantillon ou de contrôle à chaque fois.

Tableau 5 : schéma de pipetage pour la préparation d'un mastermix (MM) d'ADNc de synthèse
Rxn = réactions.

Réactif	Mastermix (MM)	Solution individuelle	MM (2 échantillons)
		1 Rxn [µl]	3 Rxn (y compris NC et 10 % d'excédent) [µl]
cDNA Solution (noir)		7,81	25,77
Reverse Transcriptase (jaune)		1,00	3,3
RNase Inhibitor (transparent)		0,19	0,63
Volume total		9,00	29,7

Tableau 6 : répartition du mastermix (MM) de synthèse de l'ADNc et des échantillons dans les tubes de réaction PCR (bandelettes de 8). Représentation de la réalisation pour deux échantillons et un contrôle négatif (NC).

Microtubes PCR							
1	2						NC

- Mélanger et centrifuger les préparations de synthèse d'ADNc en les tapotant ou en les pipettant plusieurs fois de haut en bas.
- Incuber les préparations pour la synthèse de l'ADNc pendant au moins 5 minutes au réfrigérateur ou sur de la glace à +4 °C.
- Effectuer la synthèse de l'ADNc conformément au tableau 7. Veiller à l'activation du couvercle chauffant.
- L'ADNc terminé peut être conservé une nuit au réfrigérateur (entre +4 et +8 °C). Pour un stockage prolongé, congeler à -20 °C.

Tableau 7 : paramètres du programme de synthèse de l'ADNc pour un instrument PCR standard.

Température cible [°C]	Durée [hh:mm:ss]	Segment
16	00:30:00	Hybridation
42	00:30:00	Transcription inverse
85	00:05:00	Inactivation d'enzymes
4 à 10	∞	Refroidissement

9.3. Réalisation de la préamplification

- Décongeler brièvement la PreAmp Solution (vert) à température ambiante ou au réfrigérateur, puis la mélanger pendant environ 3 secondes sur le mélangeur à vortex, la centrifuger et la stocker dans le bloc réfrigérant.

Effectuez les étapes suivantes sous un banc PCR propre.

- Pour chaque échantillon de patient, présenter **trois** préparations de 16 µl de PreAmp Solution dans des bandelettes PCR de 8 et ajouter 4 µl de chaque ADNc nouvellement synthétisé (voir tableau 8).
- Pour le contrôle négatif, il suffit d'utiliser **une fois** 16 µl de PreAmp Solution et 4 µl de préparation d'ADNc.
- Mélanger et centrifuger les préparations de préamplification en les tapotant ou en les pipettant plusieurs fois.
- Effectuer la préamplification conformément au tableau 9. Veiller à l'activation du couvercle chauffant.
- Les préamplifications terminées peuvent être conservées une nuit au réfrigérateur (entre +4 et +8 °C). Pour un stockage prolongé, congeler à -20 °C.

Tableau 8 : représentation de la réalisation d'une préamplification pour deux échantillons et un contrôle négatif (NC).

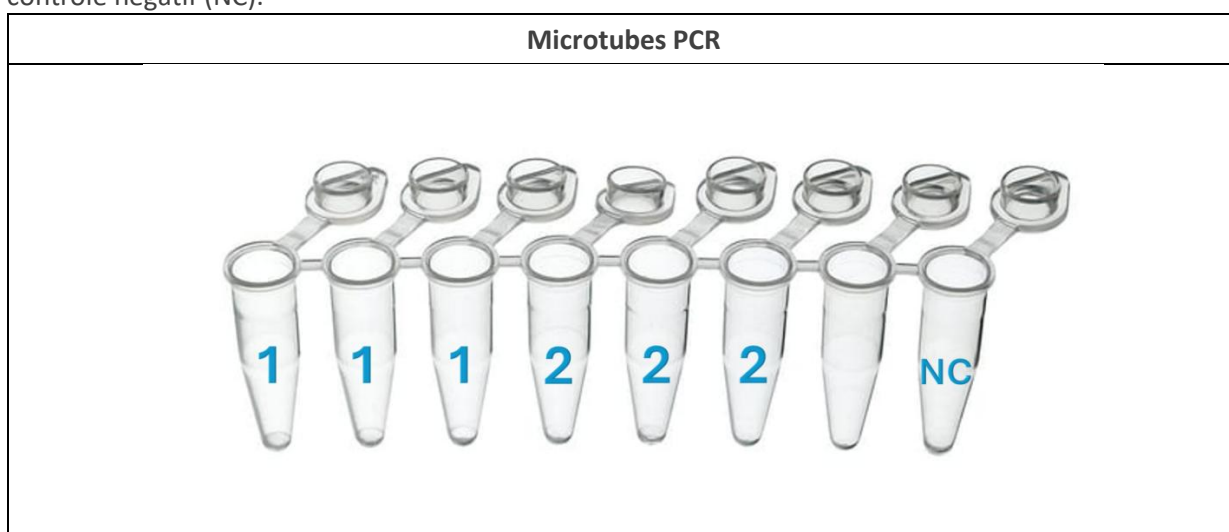


Tableau 9 : paramètres du programme de préamplification pour un instrument PCR standard.

Cycles	Température cible [°C]	Durée [hh:mm:ss]	Segment
1	95	00:01:00	Activation d'enzymes
15	95	00:00:15	Dénaturation
	60	00:04:00	Hybridation + élongation
1	4 à 10	∞	Refroidissement

Remarque : il faut veiller à programmer le nombre correct de cycles, car l'entrée des cycles peut varier selon les différents systèmes de cycleur PCR (nombre total de cycles ou nombre de répétitions de cycles).

9.4. Préparation des échantillons préamplifiés

- Décongeler la Target Solution (bleu) et la Control Solution (violet) à l'abri de la lumière dans le réfrigérateur ou brièvement à température ambiante, également à l'abri de la lumière. Décongeler la PCR-grade water (blanc) à température ambiante. Conserver les réactifs dans un bloc réfrigérant.
- Le cas échéant, décongeler brièvement les préamplifiés à température ambiante ou au réfrigérateur, les centrifuger et les stocker dans le bloc réfrigérant jusqu'à leur utilisation ultérieure.

Effectuez les étapes suivantes sous un banc PCR propre.

- Pour chaque échantillon de patient, déposer 60 µl de PCR-grade water (blanc) dans un microtube.
- Ajouter les trois préparations de chaque échantillon à la PCR-grade water (3 × 20 µl de préamplificateur = 60 µl + 60 µl de PCR-grade water).
- Pour le contrôle négatif, introduire 20 µl de PCR-grade water dans un microtube et ajouter le préamplificateur correspondant.

9.5. Occupation de la plaque qPCR

- Mélanger la Target Solution (bleu) et la Control Solution (violet) pendant environ 3 secondes sur le mélangeur à vortex, centrifuger et stocker dans le bloc réfrigérant.
- Six puits sont nécessaires pour chaque échantillon de patient (trois pour la Target Solution, trois pour la Control Solution). Deux puits pour chaque contrôle négatif (voir fig. 1).
- Pipeter 15 µl de la Target Solution ou de la Control Solution dans les positions correspondantes de la plaque qPCR.
- Avant utilisation, mélanger les préamplificateurs dilués pendant environ 3 secondes sur le mélangeur à vortex, les centrifuger et les stocker dans le bloc de refroidissement
- Pipeter 5 µl de préamplificateurs dilués dans les positions correspondantes de la plaque qPCR.
- Fermer la plaque qPCR avec un film de masquage optique et la lisser sans bulles d'air à l'aide d'un applicateur pour film.
- Centrifuger la plaque PCR à l'aide d'une centrifugeuse de plaques (au moins 2 minutes (au total) pour 500 g).

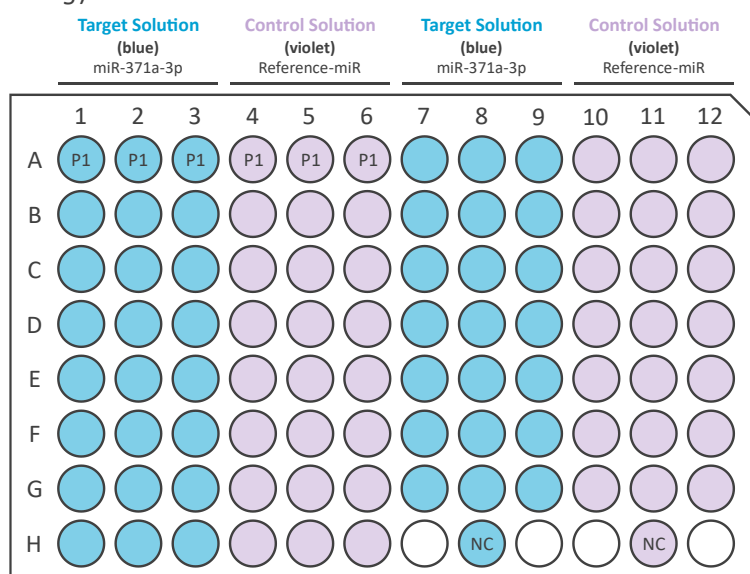


Fig. 1 : occupation recommandée de la plaque qPCR pour la mesure d'un échantillon (P1) et d'un contrôle négatif (NC).

9.6. Chargement de la plaque qPCR

En ce qui concerne la programmation de votre cycleur PCR en temps réel, veuillez vous référer aux informations du fabricant.

- Créer un programme qPCR dans le logiciel du cycleur qPCR conformément au tableau 10.
- Les taux de chauffage et de refroidissement maximaux spécifiques à l'appareil peuvent être conservés (tableau 11).
- La qPCR doit être configurée pour une quantification relative. Outre la cible miR-371a-3p, le miARN de référence sert de contrôle endogène pour la normalisation.
- Les réglages généraux suivants doivent être effectués :
Volume de réaction : 20 µl
Canal de détection : FAM
- Ouvrir la trappe de chargement de l'instrument qPCR et placer la plaque qPCR dans le cadre. Assurez-vous que la plaque s'insère parfaitement dans le cadre. Fermez la plaque de chargement.
- Démarrer le cycle qPCR et insérer un nom clairement identifiable.
- Une fois le cycle terminé, retirer la plaque qPCR de l'instrument qPCR et la jeter sans retirer le film de protection.

Particularité du LightCycler® 480II et cobas® z 480 (Roche) : dans les schémas d'occupation des plaques, les échantillons doivent être définis comme des triplicats les uns par rapport aux autres dans les mesures du miR-371a-3p et du miR de référence qui se déroulent en parallèle.

- Sous le point « Sample Editor », les trois solutions doivent être marquées comme répliques pour chaque échantillon de patient et chaque miARN. Pour cela, sélectionner trois positions et cliquer sur le bouton « Make Replicates »
- Ex. : A1-A3 = une réplique, A4-A6 = une réplique (voir fig. 1)

Tableau 10 : profil de température de la qPCR.

Nombre de cycles	Étape	Température [°C]	Durée [mm:ss]	Détection
1	Activation de la polymérase	95	10:00	
40	Dénaturation	95	00:15	
	Hybridation/élongation	60	01:00	Mesure de la fluorescence à la fin de chaque cycle
1	Refroidissement	37	01:00	

Tableau 11 : Taux de chauffage et de refroidissement spécifiques à l'appareil des cycleurs qPCR validés.

Cycleur qPCR	Vitesse maximale de chauffage ou de refroidissement [°C/s]
LightCycler® 480 II	4,4 (chauffage), 2,2 (refroidissement)
LightCycler® PRO	4,4 (chauffage), 2,2 (refroidissement)
cobas® z 480	4,4 (chauffage), 2,2 (refroidissement)
QuantStudio™ 5	3,28 (chauffage), 2,52 (refroidissement)
QuantStudio™ 5 Dx	3,28 (chauffage), 2,52 (refroidissement)
AriaDx	6,0
CFX96™	4,4 (chauffage), 2,2 (refroidissement)

10. Résultat des analyses

Remarque : Cp (= Crossing point) et Ct (= Cycle threshold) sont identiques et interchangeables. Dans ce mode d'emploi, le terme Ct est utilisé.

Il faut contrôler la trajectoire sigmoïdale typique des courbes d'amplification une fois la qPCR terminée, et avant l'évaluation des valeurs Ct.

10.1. Fichier d'évaluation du M371-Test et importation de données

Le fichier d'évaluation du M371-Test est un accessoire logiciel optionnel, et, si vous en faites la demande sur notre site Internet (<https://www.mirdetect.de/Service/>) il peut vous être envoyé sous forme électronique **par mail**. Le fichier intitulé « M371-Test Evaluation File » n'est disponible qu'en anglais. Pour une évaluation fiable et sûre, il faut toujours utiliser la version actuelle du fichier d'évaluation du M371-Test. Dès qu'une nouvelle version est disponible, les clients qui ont déjà reçu le fichier d'évaluation en seront informés par mail. Pour garantir une utilisation sûre, le fichier d'évaluation du M371-Test contient des zones verrouillées **qui ne peuvent pas être modifiées et qui ne doivent pas l'être**. Les cellules inscriptibles sont surlignées en vert clair, comme la désignation des échantillons et la zone d'insertion des données de la qPCR. Après avoir inséré les données du cycle qPCR dans le fichier d'évaluation du M371-Test, la fréquence relative (RQ) du miR-371a-3p est automatiquement calculée et le résultat du test s'affiche.

10.2. Résultat des analyses

Paramètres d'analyse :

Tableau 12 : paramètres d'analyse spécifiques à l'appareil.

Cycleur qPCR	Valeur seuil	Ligne de base
LightCycler® 480 II	Abs Quant/2nd Derivative Max	Les cycles de début et de fin doivent être choisis de manière à ce qu'un bruit initial du signal ne soit pas pris en compte et que la ligne de base se termine avant la détection d'une fluorescence significative.
LightCycler® PRO	Baseline Subtracted	
cobas® z 480	Abs Quant/2nd Derivative Max	
QuantStudio™ 5	Seuil automatique	
QuantStudio™ 5 Dx	Seuil automatique	
Aria Dx	Seuil automatique	
CFX96™	Baseline Subtracted Curve Fit	

L'analyse des résultats avec le fichier d'évaluation de M371-Test optionnel est décrite ci-dessous. La procédure décrite ici se rapporte au Roche Diagnostics LightCycler® 480 II qPCR Instrument avec bloc chauffant 96 puits et logiciel version 1.5.x. En cas d'utilisation d'autres cycleurs qPCR validés, il faut veiller à ce que les valeurs Ct médianes soient correctement reportées dans le masque de saisie du fichier d'évaluation du M371-Test. Les paramètres d'analyse spécifiques à l'appareil des systèmes de cycleur qPCR validés peuvent être consultés dans le tableau 12.

- Dans le logiciel LightCycler® 480, sélectionner l'expérience précédente et cliquer sur l'onglet « Analysis ».
- Sélectionner « Abs Quant/2nd Derivative Max » pour tous les échantillons et cliquer sur « OK ».
- Sélectionner « Median » au lieu de « Mean » dans le menu déroulant en bas à droite et calculer en cliquant sur « Calculate » en bas à gauche.
- La médiane des valeurs Ct du miR-371a-3p et du miR de référence est calculée automatiquement pour chaque échantillon et affichée dans le tableau des résultats « Replicate Statistics » en bas à gauche.
- Tous les résultats du tableau des résultats « Replicate Statistics » doivent être transférés dans le fichier d'évaluation du M371-Test. Pour cela, cliquer dans le champ « Replicate Statistics », sélectionner toutes les données avec Ctrl + A et ensuite copier les données avec Ctrl + C.
- Passer au fichier d'évaluation du M371-Test et suivre les instructions qui y figurent pour le transfert des données.
- Les résultats du contrôle négatif pour la mesure miR-371a-3p et miR de référence doivent être saisis manuellement dans le fichier d'évaluation. En maintenant le curseur (pointeur de la souris) sur la position du puits correspondant dans le logiciel LightCycler®, la valeur Ct mesurée s'affiche.
- Le fichier d'évaluation contient des colonnes de résultats séparées pour le diagnostic primaire et le suivi. En raison des différentes valeurs seuils, les résultats de ces colonnes peuvent différer. **Il faut veiller à lire le résultat dans la colonne correspondant au scénario en question.**

10.2.1. Témoins négatifs

Dans chaque cycle de qPCR, un contrôle négatif (NC, PCR-grade water) doit être utilisé à la fois pour la mesure du miR-371a-3p et du miR de référence afin de confirmer la bonne réalisation du test.

Un cycle qPCR est **VALABLE** si le contrôle négatif pour la mesure miR-371a-3p et le contrôle négatif pour la mesure miR de référence sont **NÉGATIFS**. Le contrôle négatif est négatif si la valeur Ct pour les deux miARN mesurés est au moins 10 cycles plus tard que la valeur la plus élevée du miARN correspondant d'un échantillon ou est à une valeur de 35 ou plus.

Un cycle qPCR est **NON VALABLE** si le contrôle négatif est **POSITIF**. Le contrôle négatif pour la mesure du miR-371a-3p et du miR de référence est positif si la valeur Ct pour chaque miARN mesuré spécifiquement est inférieure à 10 cycles plus tard que la valeur la plus élevée d'un échantillon.

Si les contrôles négatifs sont **POSITIFS**, les échantillons traités en même temps que les contrôles ne peuvent **pas** être évalués. Dans ce cas, le M371-Test doit être répété pour tous les échantillons.

Le fichier d'évaluation du M371-Test indique si tous les contrôles ont été réussis (fichier d'évaluation du M371-Test ➔ Controls : NC miR-371a et NC miR de référence).

10.2.2. miR de référence

Le miR de référence permet de savoir si une quantité suffisante de miARN de chaque échantillon était présente dans chaque préparation. Le résultat de la qPCR miR-371a-3p dépend du résultat du miR de référence.

La plage de référence de la valeur Ct du miR de référence sur l'instrument LightCycler® 480 II se situe entre 12 et 22. Quand c'est le cas, c'est qu'on a suffisamment de miARN et que les résultats sont valides.

Si la valeur Ct du miR de référence d'un échantillon est **supérieure à 22**, cela indique que les quantités de départ après l'extraction de l'ARN sont très faibles et peut compromettre un diagnostic clair.

Si la valeur Ct du miR de référence d'un échantillon est **inférieure à 12**, il est possible que l'échantillon ait subi une hémolyse et qu'il ne soit pas possible de se prononcer clairement sur le statut de la tumeur à partir de cet échantillon.

Les échantillons de patients dont la valeur Ct du miR de référence est inférieure à 12 ou supérieure à 22 doivent être prélevés et traités à nouveau avec le M371-Test.

10.2.3. Évaluation des échantillons

L'évaluation des résultats du test en fonction du scénario clinique est décrite au chapitre « 2. Bases technologiques de la procédure de test ».

11. Guide de dépannage (Troubleshooting Guide)

- Si un contrôle négatif échoue pour un cycle qPCR, l'ensemble du cycle doit être répété (échantillons, y compris le contrôle négatif pour la mesure miR-371a-3p et la mesure miR de référence).
- Des signaux indésirables dans les contrôles négatifs peuvent être dus à un couvercle chauffant non activé dans la synthèse de l'ADNc ou la préamplification. En raison d'une condensation sur les couvercles des microtubes, des décalages de concentration indésirables se produisent. Pour éviter cela, il convient de programmer une température de couvercle chauffant de 105 °C.
- Si, pour un échantillon, la valeur Ct du miR de référence est supérieure à 22, l'échantillon doit être prélevé à nouveau et traité avec le M371-Test, car la quantité de matériau de départ était insuffisante.
- Si, pour un échantillon, la valeur Ct du miR de référence est inférieure à 12, l'échantillon doit être prélevé à nouveau et traité avec le M371-Test, car l'échantillon original était probablement hémolytique.
- Si le RQ d'un échantillon du **diagnostic primaire** se situe entre 5 et 10 (plage indéterminée), veuillez prélever à nouveau le sang du patient après quelques semaines et répéter ensuite la mesure.
- Si les courbes d'amplification ne correspondent pas au tracé sigmoïdal habituel, lors du cycle suivant, il faudra centrifuger la plaque qPCR pendant un peu plus longtemps.
- Logiciel LightCycler® 480 II : si le tableau « Replicate Stats » est absent, vérifiez si les réplicats d'un échantillon de patient sont attribués les uns aux autres en tant que réplicats.

12. Limites de la procédure

- Le test ne peut être utilisé que pour le diagnostic *in vitro*.
- Le test est exclusivement conçu pour la détection des tumeurs germinales testiculaires de type II (Germ Cell Neoplasia *in situ* derived GCTs).
- Le test n'a pas montré de fonction pronostique (prédiction des récives après intervention), mais peut être utilisé pour le suivi des patients atteints de tumeurs testiculaires.
- Certains éléments indiquent que la normalisation du taux de miR-371a-3p en dessous du seuil, après une orchidectomie, prend un certain temps malgré sa courte demi-vie. Même en l'absence de tumeur, les résultats des analyses postopératoires peuvent être positifs si le délai entre l'opération et le prélèvement n'était pas suffisamment long. Dans ce cas, il est recommandé de refaire le M371-Test à une date ultérieure. La cinétique de la normalisation postopératoire fait l'objet d'une étude en cours.
- Seuls les cycleurs qPCR mentionnés au chapitre « 5.1. Équipement général de laboratoire » ont été validés.
- Ce test a été mis au point pour l'analyse du miR-371a-3p dans le sérum ou le plasma. Pour les échantillons de sérum, il est recommandé d'utiliser le gel-sérum S-Monovette® CAT de 7,5 ml (réf. 01.1602.001) ou de 9 ml (réf. 02.1388.001) de Sarstedt AG & Co. KG. Pour le plasma, seul le S-Monovette® cfDNA Exact 9,2 ml (réf. 01.2040.001) de Sarstedt AG & Co. KG est homologué.
- Les indications relatives au prélèvement et au traitement des échantillons figurant au chapitre « 8. Prélèvement et traitement des échantillons » doivent être respectées
- Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes expérimentées dans la réalisation de tests PCR.
- Le résultat du test ne peut pas être utilisé comme seul diagnostic primaire d'une tumeur germinale testiculaire ou pour détecter une récive. Tout M371-Test positif doit être confirmé par une procédure de diagnostic clinique appropriée.
- Le résultat du M371-Test doit être évalué en relation avec d'autres paramètres cliniques.
- Les tératomes purs ne présentent pratiquement pas d'augmentation de l'expression du marqueur tumoral miR-371a-3p-3p, ce qui explique que cette entité tumorale ne soit pas détectable (Dieckmann et al., 2017 ; 2019).
- Le miR de référence est exprimé de manière accrue dans le tissu cérébral des patients atteints de la maladie d'Alzheimer (Song et al., 2019). À l'heure actuelle, on ignore si cela s'applique également à la concentration du miR de référence dans le sérum ou le plasma de ces patients. Dans ce cas, des résultats de test faussement négatifs pourraient apparaître.
- Une hémolyse accrue entraîne une libération plus importante des miR de référence détectés dans le test. Il en résulte une diminution considérable des valeurs Ct du miR de référence, ce qui peut conduire à des valeurs RQ faussées et, dans le pire des cas, à un résultat de test faussement négatif (Myklebust et al., 2019).
- On ne peut pas exclure que le miR-371a-3p soit exprimé de manière accrue chez les patients Covid-19 (Goebel et al., 2022).
- On observe, dans le sérum des patients atteints de myélome multiple, des taux parfois fortement élevés de miR-371a-3p (Belge et al., 2025).

13. Données spécifiques de performances

13.1. Performances analytiques

13.1.1. Sensibilité analytique

La plus petite différence mesurable dans les valeurs RQ et les valeurs Ct a été mesurée à partir de trois niveaux de dilution d'échantillons de mimétique de miARN, composés de miR-371a-3p et de miR de référence. Chaque dilution a été mesurée dans 10 réplicats avec un lot de kit. Il en résulte que la plus petite différence mesurable est de 0,52 pmol/l.

13.1.2. Spécificité analytique

Trois échantillons différents simulant des patients (expression élevée, moyenne, pas d'expression de miR-371a-3p) ont été mesurés avec une contamination forte, faible ou sans contamination (ADN, contamination protéique). Le même lot de kit de M371-Test a été utilisé pour toutes les mesures. Les résultats ont été examinés par une analyse de régression.

La valeur Ct du miR-371a-3p a augmenté dans les échantillons fortement exprimés en raison de la contamination. Cela peut conduire à un RQ plus bas ($p=0,005$, $R^2=0,698$).

Dans les échantillons à expression modérée, la contamination par l'ADN/la protéine a entraîné des valeurs Ct significativement plus élevées de miR-371a-3p et de miR de référence, ainsi que des valeurs RQ ($p=0,001$, $R^2=0,798$; $p=0,004$, $R^2=0,711$; $p=0,001$, $R^2=0,812$).

Au vu des résultats, il convient de veiller tout particulièrement à une extraction correcte des miARN conformément au protocole du fabricant afin d'éviter une éventuelle contamination d'un échantillon de patient.

13.1.3. Limite de détection et de quantification (LoD, LoQ)

Les limites de détection et de quantification (Limit of Detection (LoD) & Limit of Quantification (LoQ)) du M371-Test ont été déterminées dans une série de dilutions du miR-371a-3p avec six niveaux de dilution ainsi que du miR de référence à concentration constante avec six réplicats chacun. Toutes les mesures ont été effectuées avec un seul lot de kit de M371-Test.

La limite de détection (LoD) a été définie au préalable de manière à ce qu'au moins 5/6 dilutions soient détectables. C'était le cas dans l'expérience jusqu'à une concentration de 7,575 fM. Le coefficient de variation était de 77,33 %.

La limite de quantification (LoQ) a été définie au préalable de manière à ce que le coefficient de variation soit inférieur ou égal à 50 %. C'était le cas jusqu'à une concentration de 30,3 fM. Pour cette concentration, le coefficient de variation est de 44,07 %. Le RQ médian au niveau de la LoD est de 1,05 ; le RQ médian au niveau de la LoQ est de 8,71. Cela signifie que la LoQ est légèrement supérieure à la valeur de cut-off de RQ = 5. Comme les valeurs inférieures à 8,71 ne peuvent pas être quantifiées avec précision, la valeur de cut-off pour le diagnostic primaire a été étendue à une plage de cut-off comprenant des valeurs RQ de 5 à 10. Les valeurs situées dans cette plage ne peuvent pas être mesurées avec précision et sont considérées comme indéterminées (INDETERMINATE).

13.1.4. Linéarité

Pour la mesure de la linéarité, un échantillon de mimétique de miARN a été dilué six fois au 1/10 à une concentration de 500 pM. Chaque dilution a été mesurée trois fois indépendamment par le même opérateur avec un lot de kit de M371-Test à des dates différentes. On obtient ainsi une efficacité de la PCR de 90 % en moyenne, et le coefficient de corrélation (R^2) était de 0,993-0,997. En tenant compte des valeurs Ct du miR-371a-3p, on avait des concentrations allant de 5 fM à 500 fM dans la plage linéaire. A une concentration de 0,5 fM, le miR-371a-3p n'était pas détectable.

13.2. Précision

13.2.1. Précision de la reproductibilité

La reproductibilité des résultats des tests a été déterminée en testant de manière répétée des échantillons à quatre concentrations différentes (expression élevée, moyenne, faible et nulle de miR-371a-3p). Chaque échantillon a été traité dans 30 réplicats avec un lot de kit de M371-Test par un opérateur. Le coefficient de variation pour les échantillons à expression élevée et moyenne est d'environ 14 %. Pour les échantillons à faible expression, le coefficient de variation peut atteindre 85 %, c'est pourquoi la limite de quantification doit être respectée lors de l'évaluation. Les échantillons représentant des patients sans tumeur peuvent présenter un coefficient de variation de 127 %. Ceci a été observé à une concentration de 5 fM. Comme cette concentration est inférieure à la limite de détection (7,575 fM), un coefficient de variation plus élevé ne pose pas de problème.

13.2.2. Précision de comparaison

Les paramètres suivants ont été étudiés pour la précision de comparaison :

- Différents opérateurs
- Différents consommables (plaques qPCR)
- Différents laboratoires (différents instruments de cycleur PCR et de cycleur qPCR (LightCycler® 480II))

Pour chaque opérateur, quatre concentrations différentes d'échantillons ont été mesurées dans deux réplicats (expression élevée, moyenne, faible et aucune expression de miR-371a-3p). Quatre concentrations (expression élevée, moyenne, faible et aucune expression de miR-371a-3p) ont été mesurées par type de plaque, avec quatre réplicats chacune. Quatre concentrations (expression élevée, moyenne, faible et aucune expression de miR-371a-3p) ont été mesurées par laboratoire, avec quatre réplicats chacune.

Les opérateurs et les consommables tels que les plaques qPCR n'ont pas eu d'influence significative sur le RQ des échantillons analysés ($p = 0,09 - 0,33$, Kruskal Wallis ou $p = 0,25 - 0,81$, Mann-Whitney U). En comparant deux laboratoires, une différence significative est apparue dans la plage supérieure du RQ ($p = 0,014$, Mann-Whitney U dans la plage RQ 200-2000). Celle-ci ne concernait toutefois pas la zone du seuil de décision clinique ($RQ = 10$) et se situait dans une fourchette de 21-22 % pour le coefficient de variation.

13.3. Performances cliniques

Les performances cliniques du M371-Test ont notamment été démontrées dans une étude multicentrique menée dans 37 cliniques d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, de Hongrie et d'Italie (Dieckmann et al., 2019). Pour cette étude, des échantillons de sérum de 616 patients atteints de tumeurs à cellules germinales et de 258 patients témoins ont été mesurés à l'aide du M371-Test. Afin de déterminer la performance clinique pour le diagnostic primaire, des échantillons de 522 patients atteints de tumeurs, dont 323 séminomes et 199 non-séminomes, ont été comparés à des échantillons de 258 patients témoins.

Dans le diagnostic primaire des tumeurs à cellules germinales, le M371-Test a présenté une sensibilité de 91,8 % et une spécificité de 96,1 %. L'AUC (aire sous la courbe ROC) était de 0,970 et la valeur prédictive positive était de 97,2 % (tableau 13).

Tableau 13 : caractéristiques de performance clinique du M371-Test (tiré de Dieckmann et al. 2019).

Groupe	AUC	Sensibilité	Spécificité	VPP*	VPN*	RV+	RV-
TCG (n=522) vs. contrôles (n=258)	0,970 (0,958 – 0,981)	91,8 (89,1 – 94,0)	96,1 (93,0 – 98,1)	97,2 (92,9 – 99,2)	82,7 (74,0 – 89,45)	23,675 (12,89 – 43,49)	0,086 (0,06 – 0,11)
Séminomes (n=323) vs. contrôles (n=258)	0,964 (0,949 – 0,979)	89,8 (85,9 – 92,8)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
Non-séminomes (n=199) vs. contrôles (n=258)	0,978 (0,962 – 0,994)	95,0 (91,0 – 97,6)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
CS I (n=371) vs. contrôles (n=258)	0,958 (0,942 – 0,974)	88,9 (85,3 – 92,0)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
CS II/III (n=151) vs. contrôles (n=258)	0,998 (0,995 – 1,0)	98,7 (95,3 – 99,8)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-
Récidives (n=46) vs. contrôles (n=258)	0,921 (0,862 – 0,981)	82,6 (68,6 – 92,2)	96,1 (93,0 – 98,1)	-	-	-	-

*Les caractéristiques de performance clinique pour la VPP et la VPN sont basées sur n = 155 TCG et n = 90 contrôles. AUC : Area under the curve (aire sous la courbe), CS : Clinical stage (stade clinique), TCG : tumeur à cellules germinales, RV+ : rapport de vraisemblance positif, RV- : rapport de vraisemblance négatif, VPP : valeur prédictive positive, VPN : valeur prédictive négative. Valeurs entre parenthèses = intervalle de confiance de 95 %.

Les récurrences de patients atteints de TCG ont pu être correctement déterminées dans 10 cas sur 10 et 4 cas sur 4, respectivement, au moyen d'une expression accrue de miR-371a-3p (Dieckmann et al., 2017 ; van Agthoven et al., 2017). Un autre groupe a montré une augmentation de l'expression de miR-371a-3p pendant une rechute chez des échantillons de 10 patients TGCT (Terbuch et al., 2018).

Dieckmann et al. ont montré une sensibilité de 83 % pour $n = 46$ récurrences de TGCT avec une normalisation des taux sériques de miR-371a-3p après un traitement réussi de la récurrence (Dieckmann et al., 2019). Une augmentation de miR-371a-3p en cas de récurrence a également été constatée par Rosas Plaza et al. (Rosas Plaza et al., 2019).

Dans une série de $n = 151$ patients TGCT cliniques au stade 1, Lobo et ses collègues ont trouvé $n = 34$ cas de rechute. Ils ont pu en détecter $n = 32$ (94 %) avec la mesure du miR-371a-3p, alors que la valeur étalon classique (AFP et β -hCG) n'était élevée que dans 38 % des cas (Lobo et al., 2020).

La fiabilité avec laquelle l'expression de miR-371a-3p détecte les récurrences a encore été confirmée par Fankhauser et al. Dans une étude portant sur 30 patients, une augmentation de l'expression de miR-371a-3p a été observée chez 10/10 patients présentant des récurrences, alors que miR-371a-3p n'était élevé que chez un seul patient sans récurrence (Fankhauser et al., 2022). Cette augmentation s'est normalisée dès la mesure suivante, ce qui indique que même après une augmentation de l'expression, il convient de suivre l'augmentation du miR-371a-3p. Les récurrences ont pu être mesurées en moyenne deux mois plus tôt qu'avec les méthodes traditionnelles, et même plus de cinq mois plus tôt chez un patient (Fankhauser et al., 2022).

L'étude la plus complète actuelle sur les performances du M371-Test dans le suivi des patients atteints de tumeurs germinales testiculaires au stade clinique I a inclus 258 patients et les a suivis pendant une période médiane de 18 mois. Le test a été positif chez les 39 patients qui ont développé une récurrence pendant cette période. Les récurrences ont été détectées avec une sensibilité de 100 %, tout en obtenant une spécificité de 96,3 % (Belge et al., 2024). Il convient de noter que dans cette étude de suivi, une expression relative de $RQ = 15$ a été utilisée comme cut-off pour détecter les récurrences, ce qui diffère du cut-off utilisé dans le diagnostic primaire ($RQ = 5$, Dieckmann et al., 2019) (voir aussi « 2. Bases technologiques de la procédure de test »). Avec les marqueurs sériques classiques β -hCG et AFP, les récurrences ont certes pu être détectées avec une spécificité de 91,8 %, mais elles n'ont atteint qu'une sensibilité de 45,2 %. Des détails supplémentaires sur la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives positives et négatives du M371-Test par rapport aux marqueurs sériques classiques dans le suivi des patients atteints de tumeurs à cellules germinales au stade clinique I sont résumés dans le tableau 14.

Tableau 14. Performances cliniques du M371-Test dans le suivi des patients atteints de TCG CS I par rapport aux marqueurs sériques classiques (tiré de Belge et al., 2024).

Marqueur	Récidives confirmées cliniquement				Cas sans récidive				VPP [%]	VPN [%]
	n	VP	FN	Sensibilité [%]	n	VN	FP	Spécificité [%]		
M371, toutes TCG	39	39	0	100,0 (100,0 – 100,0)	219	211	8	96,3 (93,9 – 98,8)	83,0 (72,2 – 93,7)	100,0 (100,0 – 100,0)
M371, S	17	17	0	100,0 (100,0 – 100,0)	172	166	6	96,5 (93,8 – 99,3)	73,9 (56,9 – 91,8)	100,0 (100,0 – 100,0)
M371, NS	22	22	0	100,0 (100,0 – 100,0)	47	45	2	95,7 (92,9 – 100,0)	91,7 (80,7 – 100,0)	100,0 (100,0 – 100,0)
β-hCG	31	11	20	35,5 (19,2 – 54,6)	196	192	4	98,0 (94,9 – 99,4)	73,3 (51,0 – 95,7)	90,6 (86,6 – 94,5)
AFP	32	8	24	25,0 (11,5 – 43,4)	196	184	12	93,9 (89,5 – 96,8)	40,0 (18,5 – 61,5)	88,5 (84,1 – 92,8)
β-hCG / AFP	31	14	17	45,2 (27,3 – 64,0)	196	180	16	91,8 (87,1 – 95,3)	46,7 (28,8 – 64,5)	91,4 (87,4 – 95,3)

TCG : tumeur germinale, S : séminome, NS : non-séminome, β-hCG/AFP : cas présentant au moins un marqueur sérique positif β-hCG et/ou AFP, n : nombre de cas recensés, VP : vrai positif, FN : faux négatif, VN : vrai négatif, FP : faux positif, VPN : valeur prédictive négative, VPP : valeur prédictive positive. Valeurs entre parenthèses = intervalle de confiance de 95 %.

Avec le plasma comme matrice d'échantillon, le M371-Test offre des performances diagnostiques comparables. Selon l'état actuel des connaissances, la sensibilité de l'utilisation du plasma est de 92,5 %, avec une spécificité de 100 % (Heidenreich et al., 2026).

13.4. Interférences

13.4.1. Hémolyse

Une hémolyse accrue entraîne une libération plus importante des miR de référence détectés dans le test. Il en résulte une diminution considérable des valeurs Ct du miR de référence, ce qui peut conduire à des valeurs RQ faussées et, dans le pire des cas, à un résultat de test faussement négatif. Vingt sérums de patients ont été analysés pour l'hémolyse sur la base de la coloration et par mesure photométrique (414 nm). Chaque échantillon a été mesuré simplement à l'aide du M371-Test. Le degré d'hémolyse a eu une influence significative sur la mesure du miR de référence ($p=0,002$). Un degré d'hémolyse plus élevé entraîne une valeur Ct plus faible du miR de référence ($R^2=0,437-0,743$).

13.4.2. Autres états de santé

- Des concentrations élevées de miR de référence ont été observées dans le tissu cérébral de patients atteints de la maladie d'Alzheimer (Song et al., 2019). On ignore pour l'instant si le sérum ou le plasma de ces patients présente également des concentrations élevées du miR de référence, susceptibles de fausser le résultat du test.

- Suite à une étude, on a pu observer de manière isolée une augmentation des valeurs du miR-371a-3p dans le sérum de patients atteint de la COVID-19 (Goebel et al., 2022).
- On observe, dans le sérum des patients atteints de myélome multiple, des taux parfois fortement élevés de miR-371a-3p (Belge et al., 2025).

13.4.3. Réactivité croisée

Les substances suivantes ont été testées pour une interférence avec le M371-Test : contamination de l'ADN, protéines, EDTA, citrates, héparine, séquences miR similaires (miR-372-3p).

Pour le test d'interférence, on a utilisé CLSI Interference Testing in Clinical Chemistry 3rd ed. Initialement, un échantillon de sérum pour chaque interférent a été divisé en deux groupes, dont l'un a été enrichi avec une concentration d'interférent trois fois supérieure à celle normalement attendue. L'autre groupe n'a pas été enrichi en interférents et a servi de contrôle. Chaque groupe a été mesuré dans 7 réplicats. Si la différence de résultat dépassait un niveau prédéterminé (50 %) du groupe test par rapport au groupe témoin, une expérience dose-réponse était réalisée.

En cas de contamination par de l'ADN, des protéines et de l'héparine, une influence sur le RQ et le résultat du test a été observée même en présence de très faibles contaminations.

Bien que l'isolement recommandé des miARN et les méthodes similaires éliminent l'ADN et les protéines des échantillons de sérum, le non-respect du protocole du fabricant peut entraîner une contamination des échantillons des patients par l'ADN ou les protéines. Cette contamination peut entraîner des résultats faussés. La société mir|detect GmbH recommande donc vivement de suivre strictement les protocoles du fabricant.

Étant donné que même de petites quantités d'héparine peuvent influencer les résultats des échantillons des patients, mir|detect GmbH recommande l'utilisation du gel-sérum S-Monovette® CAT ou de S-Monovette® cfDNA Exact (tous deux commercialisés par Sarstedt AG & Co. KG) pour le prélèvement sanguin et l'extraction de sérum ou de plasma.

Il n'est pas exclu que d'autres interférences potentielles soient détectées à l'avenir.

13.5. Summary of Safety and Performance (rapport succinct sur la sécurité et les performances)

Le dernier rapport succinct sur la sécurité et les performances (« Summary of Safety and Performance ») peut être consulté sur EUDAMED

(<https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home>) ou demandé en remplissant le formulaire de contact sur www.mirdetect.de/Service.

14. Signification des symboles

L'utilisation de symboles se fait sur la base de la norme DIN EN ISO 15223-1:2021 (Dispositifs médicaux - Symboles à utiliser pour l'étiquetage des dispositifs médicaux, étiquetage et informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales (ISO 15223-1:2016, version corrigée 2017-03) ; version en allemand EN ISO 15223-1:2016). Les symboles et leurs significations sont présentés ci-dessous (voir tableau 15).

Tableau 15 : représentation des symboles et de leurs significations.

	Marquage CE + code l'organisme notifié (XXXX)
	Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>
	Respecter le mode d'emploi électronique
	Référence
	Numéro de lot
	Informations sur l'UDI
	Représentant légal (XX =_ code spécifique au pays ou à la région
	Fabricant
	Distributeur
	Suffisant pour <n> examens
	Protéger contre la lumière du soleil
	Limite de température
	Utilisable jusqu'à
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

15. Modifications par rapport aux modes d'emploi précédents

15.1. Modifications par rapport à la version 15

- Remplacement du symbole indiquant la présence d'un mode d'emploi (ISO 7000-1641) par celui indiquant la présence d'un mode d'emploi électronique (ISO 7000-3500).
- Ajout de la possibilité d'utiliser du plasma prélevé à l'aide du S-Monovette® cfDNA Exact (chapitres 1, 2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4, 8, 12, 13.4.2 et 13.4.3).
- Ajout du MagMAX™ mirVana™ au kit d'isolation d'ARN total avec le KingFisher® Apex Dx (Thermo Fisher Scientific) (pour le plasma) et le kit pour le plasma et le sérum Maxwell® RSC miRNA de Promega comme méthode supplémentaire d'isolation de l'ARN aux chapitres 5.2 et 8.3.
- Tableau récapitulatif du prélèvement et du traitement des échantillons au chapitre 8.1.
- Nouvelle référence à Heidenreich et al., 2026 au chapitre 13.3.
- Chapitre 17.3 « Distributeurs » : nouvelle référence à la liste des distributeurs disponible sur le site web de mir|detect GmbH.

16. Références bibliographiques

Belge G, Dumlapinar C, Nestler T, Klemke M, Törzsök P, Trenti E, Pichler R, Loidl W, Che Y, Hiester A, Matthies C, Pichler M, Paffenholz P, Kluth L, Wenzel M, Sommer J, Heinzelbecker J, Schriefer P, Winter A, Zengerling F, Kramer MW, Lengert M, Frey J, Heidenreich A, Wülfing C, Radtke A, Dieckmann KP. Detection of recurrence through microRNA-371a-3p serum levels in a follow-up of stage I testicular germ cell tumors in the DRKS-00019223 study. Clin Cancer Res. 2024; 30: 404-412. doi: [10.1158/1078-0432.CCR-23-0730](https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-23-0730).

Belge G, Klemke M, Hansen B, Dumlapinar C, Igde A, Arnold D, Salwender H, Wülfing C, Soave A, Dieckmann KP. Biomarker microRNA-371a-3p - expression in malignancies other than germ-cell tumours. J Cancer Res Clin Oncol. 2025; 151: 58. doi: [10.1007/s00432-025-06101-4](https://doi.org/10.1007/s00432-025-06101-4).

Dieckmann KP, Radtke A, Spiekermann M, Balks T, Matthies C, Becker P, Ruf C, Oing C, Oechsle K, Bokemeyer C, Hammel J, Melchior S, Wosniok W, Belge G. Serum Levels of MicroRNA miR-371a-3p: A Sensitive and Specific New Biomarker for Germ Cell Tumours. Eur Urol. 2017; 71: 213-220. doi: [10.1016/j.eururo.2016.07.029](https://doi.org/10.1016/j.eururo.2016.07.029).

Dieckmann KP, Radtke A, Geczi L, Matthies C, Anheuser P, Eckardt U, Sommer J, Zengerling F, Trenti E, Pichler R, Belz H, Zastrow S, Winter A, Melchior S, Hammel J, Kranz J, Bolten M, Krege S, Haben B, Loidl W, Ruf CG, Heinzelbecker J, Heidenreich A, Cremers JF, Oing C, Hermanns T, Fankhauser CD, Gillessen S, Reichegger H, Cathomas R, Pichler M, Hentrich M, Eredics K, Lorch A, Wülfing C, Peine S, Wosniok W, Bokemeyer C, Belge G. Serum Levels of MicroRNA-371a-3p (M371-Test) as a New Biomarker of Testicular Germ Cell Tumors: Results of a Prospective Multicentric Study. J Clin Oncol. 2019; 37: 1412-1423. doi: [10.1200/JCO.18.01480](https://doi.org/10.1200/JCO.18.01480).

Fankhauser CD, Christiansen AJ, Rothermundt C, Cathomas R, Wettstein MS, Grossmann NC, Grogg JB, Templeton AJ, Hirschi-Blickenstorfer A, Lorch A, Gillessen S, Moch H, Beyer J, Hermanns T. Detection of recurrences using serum miR-371a-3p during active surveillance in men with stage I testicular germ cell tumours. Br J Cancer. 2022; 126: 1140-1144. doi: [10.1038/s41416-021-01643-z](https://doi.org/10.1038/s41416-021-01643-z).

Goebel H, Koeditz B, Huerta M, Kameri E, Nestler T, Kamphausen T, Friemann J, Hamdorf M, Ohrmann T, Koehler P, Cornely OA, Montesinos-Rongen M, Nicol D, Schorle H, Boor P, Quaas A, Pallasch C,

Heidenreich A, von Brandenstein M. COVID-19 Infection Induce miR-371a-3p Upregulation Resulting in Influence on Male Fertility. *Biomedicines*. 2022; 10: 858. doi: [10.3390/biomedicines10040858](https://doi.org/10.3390/biomedicines10040858).

Heidenreich A, Niemzok T, Kämper M, Belge G, Klemke M, Dieckmann KP, Diesend J. Measuring microRNA-371a-3p in testicular germ cell tumors-making the test ready for clinical routine practice. *Discov Oncol*. 2026; 17: 840. doi: [10.1007/s12672-026-05345-x](https://doi.org/10.1007/s12672-026-05345-x).

Lobo J, Leão R, Gillis AJM, van den Berg A, Anson-Cartwright L, Atenafu EG, Kuhathaas K, Chung P, Hansen A, Bedard PL, Jewett MAS, Warde P, O'Malley M, Sweet J, Looijenga LHJ, Hamilton RJ. Utility of Serum miR-371a-3p in Predicting Relapse on Surveillance in Patients with Clinical Stage I Testicular Germ Cell Cancer. *Eur Urol Oncol*. 2020: S2588-9311(20)30180-2. doi: [10.1016/j.euo.2020.11.004](https://doi.org/10.1016/j.euo.2020.11.004).

Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta C(T)) Method. *Methods*. 2001; 25: 402-408. doi: [10.1006/meth.2001.1262](https://doi.org/10.1006/meth.2001.1262).

Myklebust MP, Rosenlund B, Gjengstø P, Bercea BS, Karlsdottir Á, Brydøy M, Dahl O. Quantitative PCR Measurement of miR-371a-3p and miR-372-p Is Influenced by Hemolysis. *Front. Genet*. 2019; 10: 463. doi: [10.3389/fgene.2019.00463](https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00463).

Rosas Plaza X, van Agthoven T, Meijer C, van Vugt MATM, de Jong S, Gietema JA, Looijenga LHJ. miR-371a-3p, miR-373-3p and miR-367-3p as Serum Biomarkers in Metastatic Testicular Germ Cell Cancers Before, During and After Chemotherapy. *Cells*. 2019; 8: 1221. doi: [10.3390/cells8101221](https://doi.org/10.3390/cells8101221).

Song Y, Hu M, Zhang J, Teng ZQ, Chen C. A novel mechanism of synaptic and cognitive impairments mediated via microRNA-30b in Alzheimer's disease. *EBioMedicine*. 2019; 39: 409-421. doi: [10.1016/j.ebiom.2018.11.059](https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.11.059).

Terbuch A, Adiprasito JB, Stiegelbauer V, Seles M, Klec C, Pichler GP, Resel M, Posch F, Lembeck AL, Stöger H, Szkandera J, Pummer K, Bauernhofer T, Hutterer GC, Gerger A, Stotz M, Pichler M. MiR-371a-3p Serum Levels Are Increased in Recurrence of Testicular Germ Cell Tumor Patients. *Int J Mol Sci*. 2018; 19: 3130. doi: [10.3390/ijms19103130](https://doi.org/10.3390/ijms19103130).

van Agthoven T, Eijkenboom WMH, Looijenga LHJ. microRNA-371a-3p as informative biomarker for the follow-up of testicular germ cell cancer patients. *Cell Oncol (Dordr)*. 2017; 40: 379-388. doi: [10.1007/s13402-017-0333-9](https://doi.org/10.1007/s13402-017-0333-9).

17. Informations pour l'acheteur

17.1. Fabricant



mir|detect GmbH
Fischkai 1
27572 Bremerhaven, Allemagne

Pour plus d'informations et d'aide, visitez notre site Internet, envoyez-nous un e-mail ou appelez-nous :

Site Web : <https://www.mirdetect.de>

E-mail : info@mirdetect.de

Téléphone : +49 (0) 421 / 40 89 37 11-0

17.2. Marques déposées

Toutes les marques déposées, marques et noms mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives.

17.3. Distributeurs



Vous trouverez la liste de nos partenaires de distribution sur notre site web :
<https://www.mirdetect.de>

18. Annexe

18.1. Modèles pour la préparation du mastermix de synthèse de l'ADNc (MM)

Tableau 16 : schéma de pipetage pour la préparation d'un mastermix de synthèse d'ADNc pour 2, 3, 4 et 5 échantillons (y compris 10 % de volume excédentaire), Rxn = réactions.

Mastermix (MM) Réactif	MM (2 échantillons)	MM (3 échantillons)	MM (4 échantillons)	MM (5 échantillons)
	3 Rxn (y compris NC et excédent) [μl]	4 Rxn (y compris NC et excédent) [μl]	5 Rxn (y compris NC et excédent) [μl]	6 Rxn (y compris NC et excédent) [μl]
cDNA Solution (noir)	25,77	34,36	42,96	51,55
Reverse Transcriptase (jaune)	3,3	4,4	5,5	6,6
RNase Inhibitor (transparent)	0,63	0,84	1,05	1,25
Volume total	29,7	39,6	49,5	59,4